

Bestimmung der Säurezahl (TAN) von Mineralölen nach ASTM 664

Beschreibung

Bestimmung von sauren Bestandteilen in Erdölprodukten und Schmiermitteln durch potentiometrische Titration.

Die Gesamtsäurezahl TAN ist die Menge an Base, ausgedrückt in Milligramm Kaliumhydroxid, die erforderlich ist, um alle sauren Bestandteile in 1 g Probe zu neutralisieren. Die Titration erfolgt in einer Mischung aus Toluol, Isopropylalkohol und Wasser mit KOH in Isopropylalkohol. Die Verwendung von Tetrabutylammoniumhydroxid als Titriermittel ist ebenfalls möglich.

Das Ergebnis wird berechnet als $\text{mg}_{\text{KOH}} / \text{g}$

Geräte

Titратор	TL 7000 oder höher
Elektrode	N 6480 eth
Kabel	L 1 A
Rührer	Magnetrührer TM 235 oder ähnliche
Laborgeräte	Becherglas 250 mL
	Magnetrührstab 30 mm

Reagenzien

1	KOH 0,1 mol/l in Isopropylalkohol
2	Toluol
3	Isopropanol
4	Elektrolyt L 5034 (LiCl 1.5 mol/L in Ethanol)
5	Destilliertes Wasser
Alle Reagenzien sollten mindestens analysenrein sein	

Durchführung der Titration

Reagenzien

KOH 0,1 mol/L in Isopropanol

0,1 mol/L KOH in Isopropanol ist als fertige Maßlösung erhältlich. KOH in Methanol oder Ethanol kann ebenfalls verwendet werden.

Die Lösung muss mit einem CO₂-Absorptionsmittel wie Natronkalk vor CO₂ geschützt werden.

Die Titerbestimmung erfolgt wie in der Applikation „Titer KOH“ beschrieben.

Lösemittel-Mischung

500 mL Toluol, 495 mL Isopropylalkohol und 5 mL Wasser werden in einer Flasche gemischt.

Reinigung der Elektrode

Zur Reinigung und Konditionierung der Elektrode sind 3 Schritte erforderlich:

Zuerst wird die Elektrode mit dem Lösungsmittelgemisch oder reinem Toluol gespült, um Rückstände der Probe zu entfernen.

Danach wird die Elektrode für 60s in Wasser konditioniert.

Nach dem Konditionierungsschritt wird die Elektrode mit dem Lösungsmittelgemisch gespült, um das Wasser zu entfernen.

Die Elektrode wird in einer Lösung von 1,5 mol/L LiCl in Ethanol gelagert. Wird ein anderer Elektrolyt verwendet, wird dieser Elektrolyt auch zur Lagerung verwendet.

Blindwert

Für die Blindwertbestimmung werden 125 mL Lösemittel in ein 250 mL Becherglas gegeben und mit 0,1 mol/L KOH auf einen Äquivalenzpunkt titriert. Der Blindwert sollte kleiner als 0,3 mL sein.

Probenvorbereitung

Die Probe wird in ein 250 mL Becherglas eingewogen, in 125 mL Lösemittel gelöst und mit 0,1 mol/L KOH titriert.


Die Probenmenge sollte so gewählt werden, dass der Verbrauch an 0,1 mol/L KOH sollte nicht mehr als 4-5 mL beträgt, da die Titration sonst zu lange dauert.

Die benötigte Probenmenge kann nach dieser Faustformel abgeschätzt werden:

$$W(g) = \frac{20}{\text{erwartete TAN}}$$

Titrationparameter

Blindwert

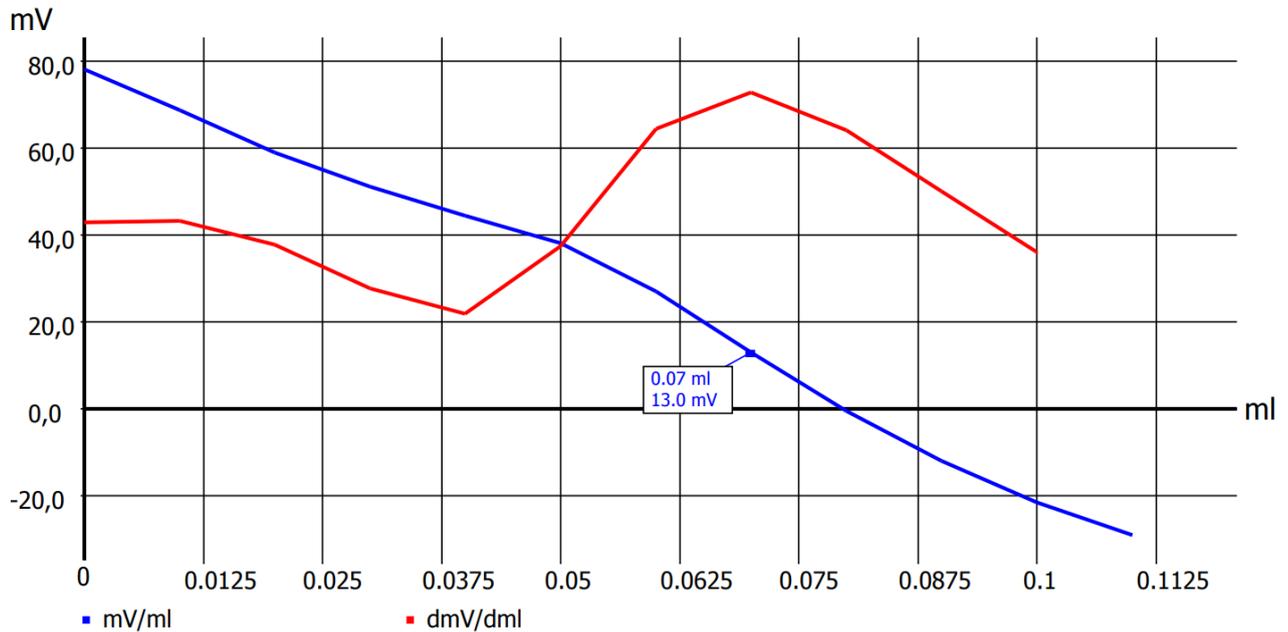


Standardmethode	Blank TAN-TBN		
Methodentyp	Automatische Titration		
Modus	Linear		
Messwert	mV		
Messgeschwindigkeit / Drift	Individuell	Feste Wartezeit	12 s
Startwartezeit	10 s		
Lineare Schrittweite	0,01 mL		
Dämpfung	Stark	Titrationrichtung	fallend
Vortitration	Aus	Wartezeit	0 s
Endwert	Aus		
EQ	An(1)	Steigungswert	60
Max. Titrationsvolumen	0.3 mL		
Dosiergeschwindigkeit	100%	Füllgeschwindigkeit	30 s

Berechnung:

$$mL = EQ1$$

Die Blindwertbestimmung erfolgt als 3-fach Bestimmung, das Ergebnis wird als globale Variable (z.B. M01) gespeichert.

Probentitration

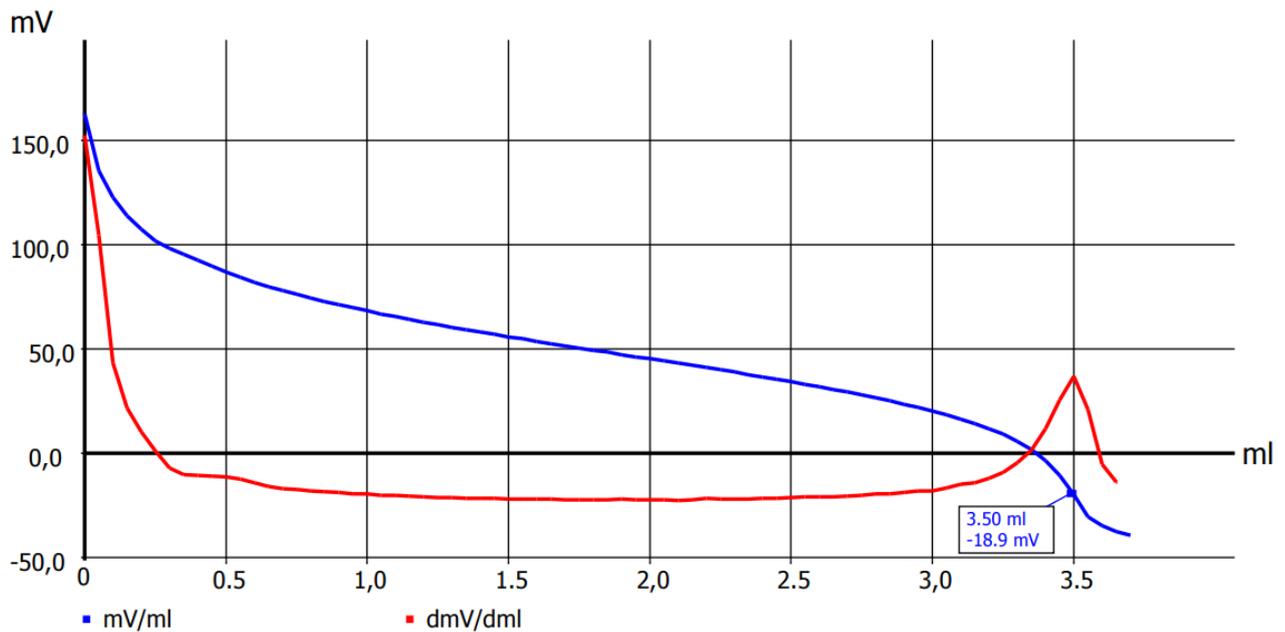

Standardmethode	TAN ASTM 664		
Methodentyp	Automatische Titration		
Modus	Linear		
Messwert	mV		
Messgeschwindigkeit / Drift	Individuell	Min. Wartezeit	7 s
		Max. Wartezeit	20 s
		Messzeit	4 s
		Drift	10 mV/min
Startwartezeit	10 s		
Lineare Schrittweite	0,05 mL		
Dämpfung	Stark	Titritationsrichtung	fallend
Vortitration	Aus	Wartezeit	0 s
Endwert	Aus		
EQ	An(1)	Steigungswert	120
Max. Titrationsvolumen	6 mL		
Dosiergeschwindigkeit	100%	Füllgeschwindigkeit	30 s

Bei Proben mit sehr niedrigen TAN-Werten können die linearen Schritte auf 0,02 oder 0,01 ml reduziert werden.

Berechnung:

$$TAN [mg(KOH)/g] = \frac{(EQ1 - B) * T * M * F1}{W * F2}$$

B	M01	Blindwert aus globalem Speicher M01
EQ1		Verbrauch des Titrationsmittels am ersten EQ
T	WA	Exakte Konzentration des Titrationsmittels
M	56,11	Molekulargewicht
W	man	Einwaage [g]
F1	1	Umrechnungsfaktor 1
F2	1	Umrechnungsfaktor 2

Fragen? Bitte kontaktieren Sie unser Applikationsteam:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, SI Analytics

Hattenbergstraße 10

D-55122 Mainz, Germany

Telefon: + 49 6131 66 5126

Fax: + 49 6131 66 5101

E-Mail: titration@si-analytics.com

SI Analytics

a xylem brand

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG · Hattenbergstr. 10 · D-55122 Mainz · Germany
Telefon: +49 6131.66. 5111 · E-Mail: Info.si-analytics@Xyleminc.com · www.si-analytics.com

Alle Namen sind eingetragene Handelsnamen oder Warenzeichen der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen. Technische Änderungen vorbehalten.
© 2018 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.