

QUICK START GUIDE

ba77175y01 02/2016

inoLab[®] Multi 9620 IDS



a xylem brand

Contents

EN English	4
DE Deutsch.....	6
CS Česky	8
DA Dansk	10
EL Ελληνικά	12
ES Español	14
FI Suomi	16
FR Français	18
HU Magyar	20
IT Italiano	22
JA 日本語	24
KO 한국어.....	26
NL Nederlands	28
NO Norsk	30
PL Polski.....	32
PT Português	34
RO Română	36
RU Русский	38
SK Slovenský	40
SV Svenska	42
TR Türkçe	44
ZH 中文.....	46

inoLab® Multi 9620 IDS

Overview

The Multi 9620 IDS meter enables you to perform measurements (pH, U, ION, conductivity, D.O.) quickly and reliably.

The Multi 9620 IDS meter provides a maximum degree of operating comfort, reliability and measuring certainty.


Keypad

Keys are indicated by brackets <..>.

The key symbol (e.g. <ENTER>) generally indicates a short keystroke (under 2 sec). A long keystroke (approx. 2 sec) is indicated by the underscore behind the key symbol (e.g. <ENTER__>).


<F1>	Situation dependent function (is shown on the display)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Switches the meter on or off
<M>	Selects the measured parameter
<CAL>	Calls up the calibration procedure
<CAL__>	Displays the calibration data
<STO>	Saves a measured value manually
<STO__>	Opens the menu for the automatic save function
<RCL>	Displays the manually stored measured values
<RCL__>	Displays the automatically stored measured values
<▲><▼>	Menu control, navigation
<◀><▶>	
<ENTER>	Opens the menu for measurement settings / confirms entries
<ENTER__>	Opens the menu for system settings
<AR>	Freezes the measured value (HOLD function) Switches the AutoRead measurement on or off
<ESC>	Cancels an action
<PRT>	Sends data to the interface (USB)
<PRT__>	Opens the menu for automatic output to USB

Display (example: pH measurement)

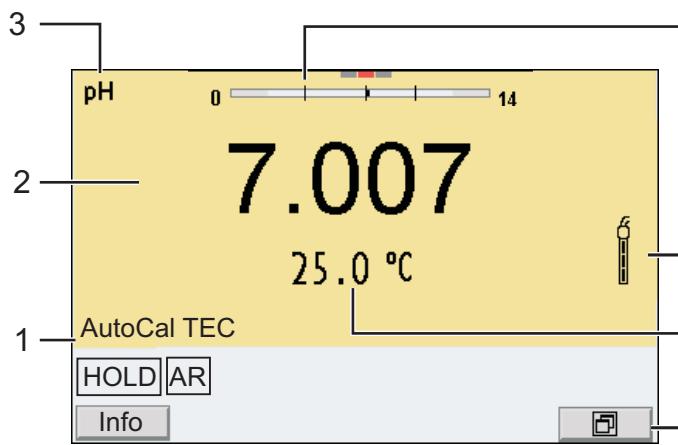

- | | | |
|---|---|---|
| 4 | 1 | Status information |
| 2 | 2 | Measured value (with unit) |
| 3 | 3 | Measured parameter |
| 4 | 4 | Continuous measurement control (CMC function) |
| 5 | 5 | Sensor symbol (calibration evaluation) |
| 6 | 6 | Measured temperature (with unit) |
| 7 | 7 | Softkeys and date/time |

Jack field /connections

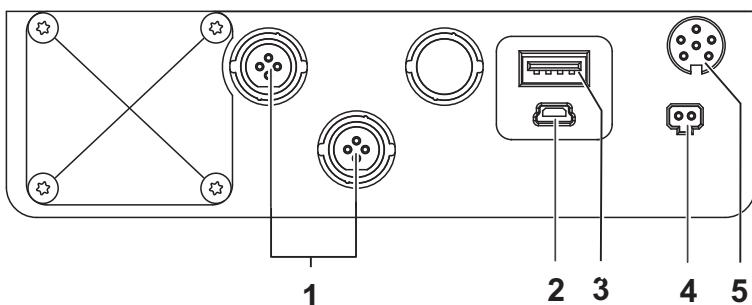

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | IDS sensors (pH, U, conductivity, D.O.) |
| 2 | 2 | USB B interface (device) |
| 3 | 3 | USB A interface (host) |
| 4 | 4 | Connection for line adaptor |
| 5 | 5 | Service interface |

Initial commissioning

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | 1 | Connect the power pack. |
| 2 | 2 | Switch on the meter with the <On/Off> key. |



Caution

Follow the safety instructions of the used sensors.

The operating manuals of the sensors are available on the supplied CD and on the Internet under www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Überblick


Mit dem Messgerät Multi 9620 IDS können Sie schnell und zuverlässig Messungen (pH, U, ION, Leitfähigkeit, Sauerstoff) durchführen. Das Messgerät Multi 9620 IDS bietet ein Höchstmaß an Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Messsicherheit.

Tastenfeld

Tasten werden durch spitze Klammern <..> veranschaulicht.
Das Tastensymbol (z. B. <ENTER>) bedeutet generell einen kurzen Tastendruck (unter 2 sec). Ein langer Tastendruck (ca. 2 sec) wird durch einen Strich hinter dem Tastensymbol (z. B. <ENTER__>) veranschaulicht.


<F1>	Situationsabhängige Funktion (wird am Display angezeigt)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Messgerät ein-/ausschalten
<M>	Messgröße anwählen
<CAL>	Kalibrierverfahren aufrufen
<CAL__>	Kalibrierdaten anzeigen
<STO>	Messwert manuell speichern
<STO__>	Automatische Speicherung konfigurieren und starten
<RCL>	Manuell gespeicherte Messwerte anzeigen
<RCL__>	Automatisch gespeicherte Messwerte anzeigen
<▲><▼>	Menüsteuerung, Navigation
<◀><▶>	
<ENTER>	Menü für Messeinstellungen öffnen / Eingaben bestätigen
<ENTER__>	Menü für Systemeinstellungen öffnen
<AR>	Messwert einfrieren (HOLD - Funktion) AutoRead-Messung ein-/ausschalten
<ESC>	Aktion abbrechen
<PRT>	Daten an die Schnittstelle (USB) senden
<PRT__>	Automatische Ausgabe an USB konfigurieren und starten

Display (Beispiel: pH-Messung)

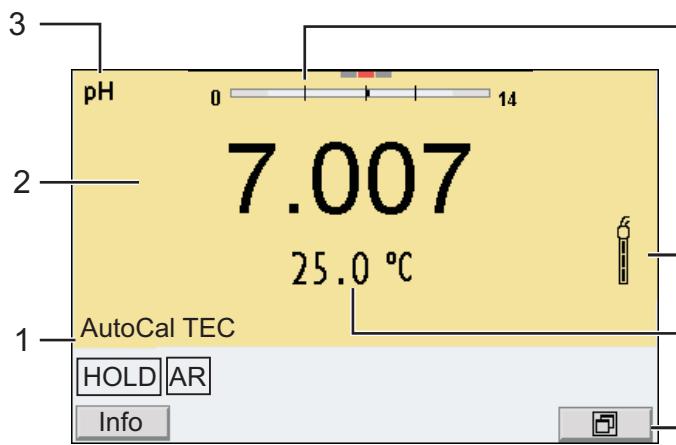

- | | | |
|---|---|--|
| 4 | 1 | Statusinformationen |
| 2 | 2 | Messwert (mit Einheit) |
| 3 | 3 | Messgröße |
| 4 | 4 | Kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC-Funktion) |
| 5 | 5 | Sensorsymbol (Kalibrierbewertung) |
| 6 | 6 | Temperaturmesswert (mit Einheit) |
| 7 | 7 | Softkeys und Datum/Uhrzeit |

Buchsenfeld /Anschlüsse

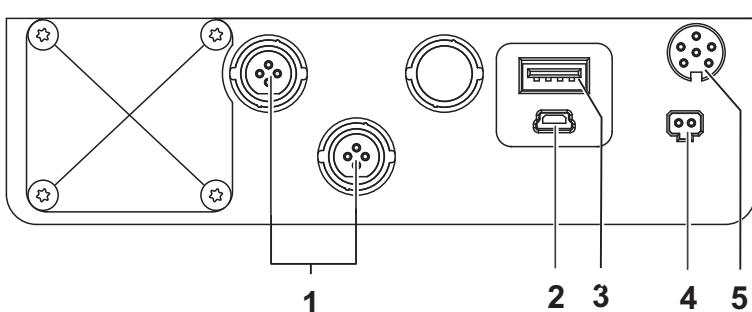

- | | |
|---|--|
| 1 | IDS Sensoren
(pH, U, Leitfähigkeit, Sauerstoff) |
| 2 | USB-B-Schnittstelle (Device) |
| 3 | USB-A-Schnittstelle (Host) |
| 4 | Anschluss für Steckernetzgerät |
| 5 | Service-Schnittstelle |

Erst-inbetriebnahme

- 1 Steckernetzgerät anstecken.
- 2 Messgerät mit der Taste <On/Off> einschalten.

**Vorsicht**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zu den verwendeten Sensoren.
Die Bedienungsanleitungen zu den Sensoren finden Sie auf der mitgelieferten CD und im Internet unter www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Přehled

Měřičem Multi 9620 IDS můžete rychle a spolehlivě měřit (pH, U, ION, vodivost, rozpuštěný kyslík).


Měřič Multi 9620 IDS nabízí v maximální míře komfort obsluhy a ovládání, spolehlivost a bezpečnost měření.

Tlačítka


Tlačítka jsou označena špičatými závorkami <..>.

Tlačítkový symbol (např. <ENTER>) všeobecně znamená krátké stisknutí tlačítka (kratší než 2 s). Dlouhé stisknutí tlačítka (cca 2 s) je znázorněno podržítkem za symbolem tlačítka (např. <ENTER__>).

<F1>	Situacně závislá funkce (indikuje se na displeji)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off (Zap/Vyp)>	Zapnutí/vypnutí přístroje
<M>	Volba měřené veličiny
<CAL>	Vyvolání kalibrace
<CAL__>	Zobrazení kalibračních údajů
<STO>	Ruční uložení naměřené hodnoty
<STO__>	Nakonfigurovat a spustit automatické ukládání
<RCL>	Zobrazení ručně uložených naměřených hodnot
<RCL__>	Zobrazení automaticky uložených naměřených hodnot
<▲><▼>:	Nastavování a navigace v nabídkách
<◀><▶>	
<ENTER>	Otevření nabídky měřických nastavení / potvrzení zadání
<ENTER__>	Otevření nabídky systémových nastavení
<AR>	Zmrazení naměřené hodnoty (funkce HOLD)
	Zapnutí / vypnutí měření s automatickým odečítáním
<ESC>	Zrušení akce
<PRT>	Vyslání dat na rozhraní (USB)
<PRT__>	Konfigurace a spuštění automatického výstupu na rozhraní USB

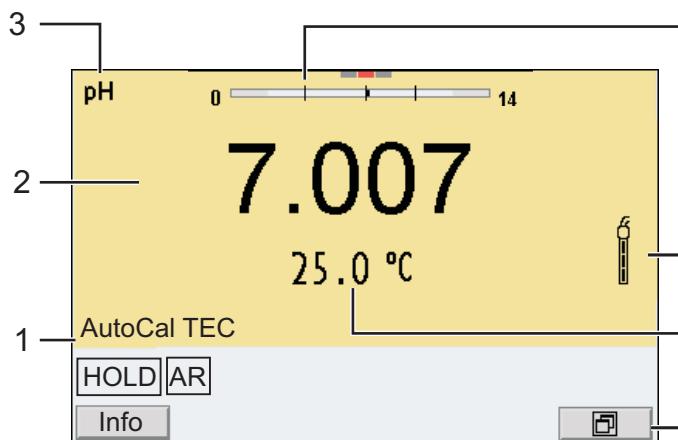Displej (příklad: měření pH)

1	Stavové informace
2	Naměřená hodnota (s jednotkou)
3	Měrná veličina
4	Nepřetržitá kontrola měřené veličiny (funkce CMC)
5	Symbol čidla (vyhodnocení kalibrace)
6	Teplota měření (s jednotkou)
7	Programovatelná funkční tlačítka a datum/čas

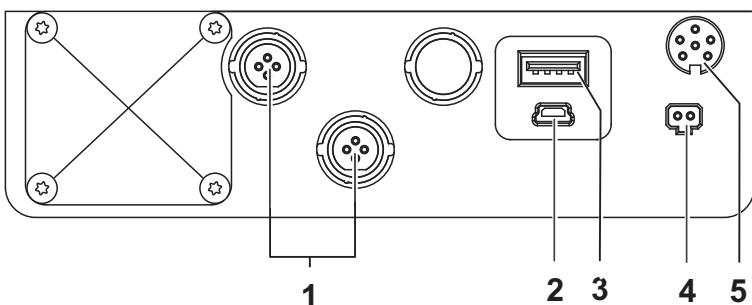Zásuvky / přípojky

1	IDS snímače (pH, U, vodivost, rozpustěný kyslík)
2	Rozhraní USB-B (přístroj)
3	Rozhraní USB-A (řídící PC)
4	Přípojka pro zástrčku síťového přístroje
5	Servisní rozhraní

První uvedení do provozu

1	Zasuňte zástrčku síťového přístroje.
2	Zapněte měřicí přístroj tlačítkem <On/Off (Zap/Vyp)> .

Pozor

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro použitá čidla.
Návody k obsluze čidel naleznete na přiloženém CD a na internetu na adrese www.WTW.com.



inoLab® Multi 9620 IDS

Oversigt

Med dette måleapparat Multi 9620 IDS kan du hurtigt foretage pålidelige målinger (pH, U, ION, Ledeevne, Oxygen).

Måleapparatet Multi 9620 IDS giver den højest tænkelige betjeningskomfort, driftsikkerhed og målenøjagtighed.


Tastefelt

Tasterne vises med spidse klammer <..>.

Tastesymbolet (f.eks. <ENTER>) betyder generelt et kort tastetryk (mindre end 2 sek.). Et langt tastetryk (ca. 2 sek.) vises med en streg efter tastesymbolet (f.eks. <ENTER__>).


<F1>	Situtationsafhængig funktion (vises på displayet)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Aktivering/deaktivering af måler
<M>	Vælg målestørrelse
<CAL>	Hent kalibreringsmetoder
<CAL__>	Vis kalibreringsdata
<STO>	Gem måleværdien manuelt
<STO__>	Konfigurer og start automatisk lagring
<RCL>	Vis manuelt gemte måleværdier
<RCL__>	Vis automatisk gemte måleværdier
<▲><▼>	Menustyring, Navigation
<◀><▶>	
<ENTER>	Åbn menuen til måleindstillinger/bekræft indtastning
<ENTER__>	Åbn menuen til systemindstillinger
<AR>	Frys måleværdi (HOLD - funktion) Aktivér/deaktiver AutoRead-måling
<ESC>	Afbryd handling
<PRT>	Send data til interface (USB)
<PRT__>	Konfigurer og start automatisk overførsel til USB

Display (eksempel: pH-måling)

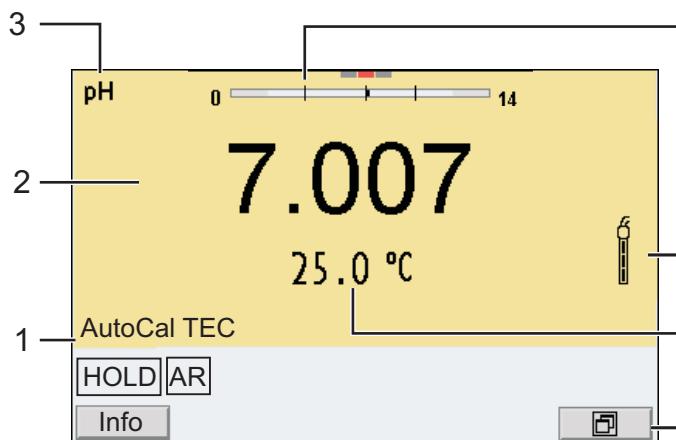

1	Statusinformationer
2	Måleværdi (med enhed)
3	Målestørrelse
4	Kontinuerlig måleværdikontrol (CMC-funktion)
5	Sensorsymbol (kalibreringsvurdering)
6	Temperaturmåleværdi (med enhed)
7	Genvejstaster samt dato/klokkeslæt

Bøsningsområde/tilslutninger

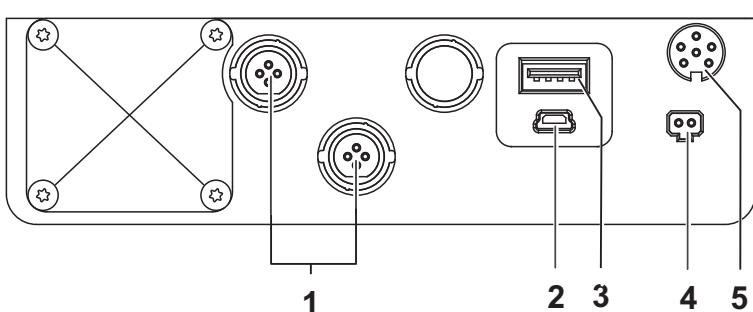

1	IDS sensorer (pH, U, leddeevne, oxygen)
2	USB-B-interface (Device)
3	USB-A-interface (Host)
4	Tilslutning til stikapparat
5	Service-interface

Første
ibrugtagning

1	Sæt stikadAPTEREN i.
2	Tænd for måleren med tasten <On/Off> .



Forsigtig
Følg sikkerhedsanvisningerne til de sensorer, der skal bruges.
Betjeningsvejledningen til sensorerne findes på den medfølgende cd og på internettet på adressen www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS


Επισκόπηση

Με τη συσκευή μέτρησης Multi 9620 IDS μπορείτε να πραγματοποιείτε γρήγορα και αξιόπιστα μετρήσεις (pH, U, ION, αγωγιμότητα, οξυγόνο). Η συσκευή μέτρησης Multi 9620 IDS παρέχει μέγιστο βαθμό άνεσης χειρισμού, αξιοπιστίας και ασφάλειας μετρήσεων.


Πληκτρολόγιο

Τα πλήκτρα απεικονίζονται με παρενθέσεις της μορφής <..>. Το σύμβολο πλήκτρου (π.χ. <ENTER>) σημαίνει γενικά σύντομο πάτημα ενός πλήκτρου (διάρκειας μικρότερης των 2 δευτ.). Το παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων (διάρκειας 2 δευτ. περίπου) απεικονίζεται με μία παύλα μετά το σύμβολο του πλήκτρου (π.χ. <ENTER_>).

<F1>	Λειτουργία ανάλογα με την κατάσταση (εμφανίζεται στην οθόνη)
<F1_>	
<F4>	
<F4_>	
<On/Off>	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής μέτρησης
<M>	Επιλογή μετρούμενου μεγέθους
<CAL>	Ανάκληση μεθόδου βαθμονόμησης από τη μνήμη
<CAL_>	Εμφάνιση δεδομένων βαθμονόμησης
<STO>	Μη αυτόματη αποθήκευση της τιμής μέτρησης
<STO_>	Διαμόρφωση και έναρξη αυτόματης αποθήκευσης
<RCL>	Εμφάνιση τιμών μέτρησης που αποθηκεύτηκαν μη αυτόματα
<RCL_>	Εμφάνιση τιμών μέτρησης που αποθηκεύτηκαν αυτόματα
<▲><▼>	Έλεγχος μενού, πλοήγηση
<◀><▶>	
<ENTER>	Άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις της μέτρησης / Επιβεβαίωση εισαγωγής τιμών
<ENTER_>	Άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις συστήματος
<AR>	'Πάγωμα' τιμής μέτρησης (λειτουργία HOLD) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέτρησης AutoRead
<ESC>	Διακοπή ενέργειας
<PRT>	Αποστολή δεδομένων στη θύρα (USB)
<PRT_>	Διαμόρφωση και έναρξη αυτόματης παροχής τιμών στη θύρα USB

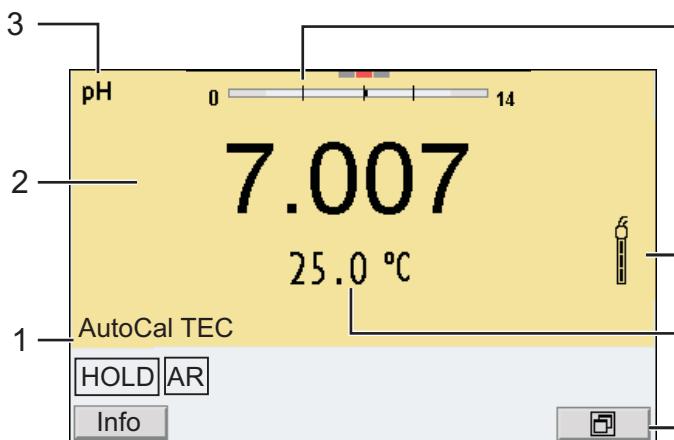Οθόνη (παράδειγμα: μέτρηση pH)

- | | |
|----|---|
| 4 | Πληροφορίες κατάστασης |
| 5 | Τιμή μέτρησης (με μονάδα) |
| 6 | Μετρούμενο μέγεθος |
| 7 | Συνεχόμενος έλεγχος τιμών μέτρησης (λειτουργία CMC) |
| 8 | Σύμβολο αισθητήρα (αξιολόγηση βαθμονόμησης) |
| 9 | Τιμή μέτρησης θερμοκρασίας (με μονάδα) |
| 10 | Προγραμματιζόμενα πλήκτρα και ημερομηνία/ώρα |

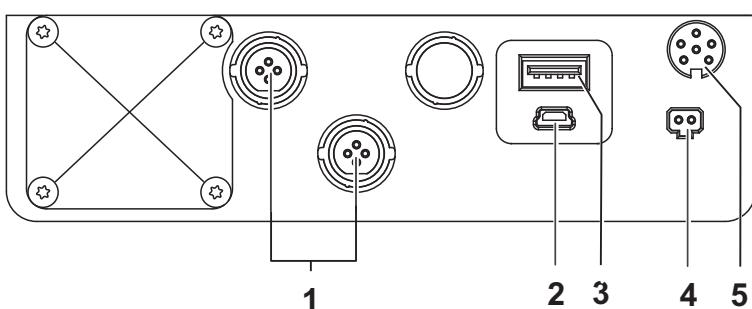Πεδίο υποδοχών /συνδέσεις

- | | |
|---|--|
| 1 | IDS αισθητήρες (pH, U, αγωγιμότητα, οξυγόνο) |
| 2 | Θύρα USB-B (Device) |
| 3 | Θύρα USB-A (Host) |
| 4 | Σύνδεση για το μετασχηματιστή |
| 5 | Υποδοχή διασύνδεσης σέρβις |

Πρώτη έναρξη λειτουργίας

- | | |
|---|--|
| 1 | Συνδέστε το μετασχηματιστή. |
| 2 | Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέτρησης με το πλήκτρο <On/Off> . |

**Προσοχή**

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας για τους χρησιμοποιούμενους αισθητήρες. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης των αισθητήρων στο παρεχόμενο CD και στο Internet, στην ιστοσελίδα www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS


Sumario

Con el instrumento de medición Multi 9620 IDS puede Ud. efectuar mediciones de (pH, U, ION, de conductibilidad y de oxígeno) de manera rápida y fidedigna. El instrumento de medición Multi 9620 IDS ofrece máxima comodidad de empleo, confiabilidad y seguridad de medición.


Teclado

Las teclas están identificadas por paréntesis angulares <..>. El símbolo de tecla (por ejemplo <ENTER>) significa por lo general una breve presión (menos de 2 segundos). Si se ha de oprimir la tecla prolongadamente (2 segundos, aprox.), se ha representado por una raya a continuación del símbolo de la tecla (por ejemplo <ENTER_>).

<F1>	Situación dependiente de la situación momentánea
<F1_>	(aparece indicada en el display)
<F4>	
<F4_>	
<On/Off>	Prender/apagar instrumento
<M>	Seleccionar la unidad de medición
<CAL>	Llamar el procedimientos de calibración
<CAL_>	Mostrar los datos de calibración
<STO>	Archivar en memoria manualmente el valor medido
<STO_>	Configurar el almacenamiento automático e iniciar la sesión
<RCL>	Visualizar los valores medidos guardados manualmente
<RCL_>	Visualizar los valores medidos guardados automáticamente
<▲><▼>	Control del menú, navegación
<◀><▶>	
<ENTER>	Acceder al menú para la configuración de medición /
<ENTER_>	Confirmar los datos ingresados
	Acceder al menú para la configuración del sistema
<AR>	Congelar el valor medido (función HOLD)
	Prender/apagar la medición AutoRead
<ESC>	Cancelar la acción
<PRT>	Transferir datos a la interfase (USB)
<PRT_>	Configurar la transmisión automática de datos a la interfase USB e iniciar la sesión

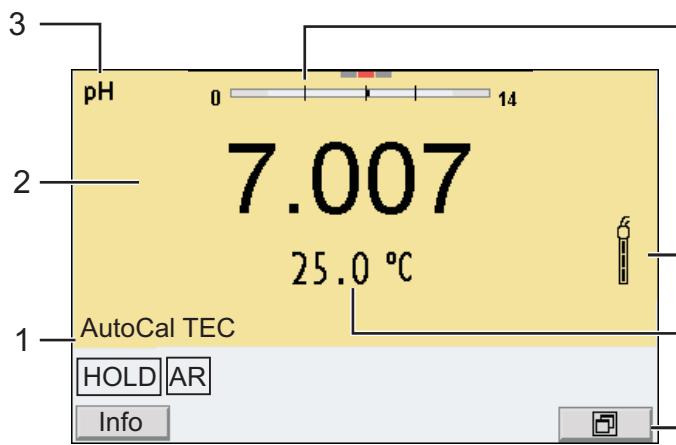Display (ejemplo: medición del pH)

- | | | |
|---|---|---|
| 4 | 1 | Información sobre el estado actual |
| 2 | 2 | Valor medido (con unidad) |
| 3 | 3 | Parámetro |
| 4 | 4 | Control permanente de los valores medidos (función CMC) |
| 5 | 5 | Símbolo del sensor (evaluación de la calibración) |
| 6 | 6 | Temperatura medida (con unidad) |
| 7 | 7 | Softkeys y fecha / hora |

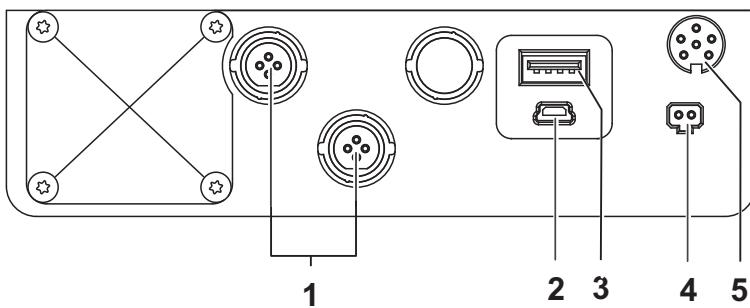Conexiones varias /conexiones

- | | |
|---|---|
| 1 | Sensores IDS
(pH, U, conductibilidad, oxígeno) |
| 2 | Interfase USB-B (device) |
| 3 | Interfase USB-A (host) |
| 4 | Conexión para el transformador de alimentación |
| 5 | Interfase de servicio |

Primera puesta en funcionamiento

- | | |
|---|---|
| 1 | Enchufar el transformador de alimentación. |
| 2 | Prender el instrumento de medición con la tecla <On/Off>. |

**Atención**

Tenga presente las instrucciones de seguridad de los sensores utilizados. Las instrucciones de empleo de los sensores se encuentran en el CD adjunto o bien, en el internet bajo www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Yleiskuvaus

Mittalaitteella Multi 9620 IDS voit suorittaa nopeasti ja luotettavasti mittauksia (pH, U, ION, johtavuus, happi).


Mittalaite Multi 9620 IDS tarjoaa enimmäismäärän käyttömukavuutta, luotettavuutta ja mittaustuloksen varmuutta.

Näppäimistö


Painikkeet havainnollistetaan hakasuluilla <..>.

Painikkeen symboli (esim. <ENTER>) tarkoittaa yleensä lyhyttä painikkeen painamista (alle 2 s.). Pitkä painikkeen painaminen (n. 2 s.) havainnollistetaan painikkeen symbolin takana olevalla viivalla (esim. <ENTER__>).

<F1>	Tilanteesta riippuva toiminto (näytetään näytössä)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Kytke mittauslaite päälle/pois
<M>	Valitse mittaussuure
<CAL>	Hae kalibrointimenetelmä
<CAL__>	Näytä kalibrointitiedot
<STO>	Tallenna mittausarvo manuaalisesti
<STO__>	Konfiguroi ja käynnistä automaattinen tallennus
<RCL>	Näytä manuaalisesti tallennettu mittausarvo
<RCL__>	Näytä manuaalisesti tallennettu mittausarvo
<▲><▼>	Valintaohjaus, navigointi
<◀><▶>	
<ENTER>	Avaa mittausasetusten valikko / vahvista tallennukset
<ENTER__>	Avaa järjestelmäasetusten valikko
<AR>	Jäädytä mittausarvo (HOLD - toiminto) Kytke AutoRead-mittaus päälle/pois päältä
<ESC>	Keskeytä toiminta
<PRT>	Lähetä tiedot liitäntään (USB)
<PRT__>	Konfiguroi ja käynnistä automaattinen lähtö USB:hen

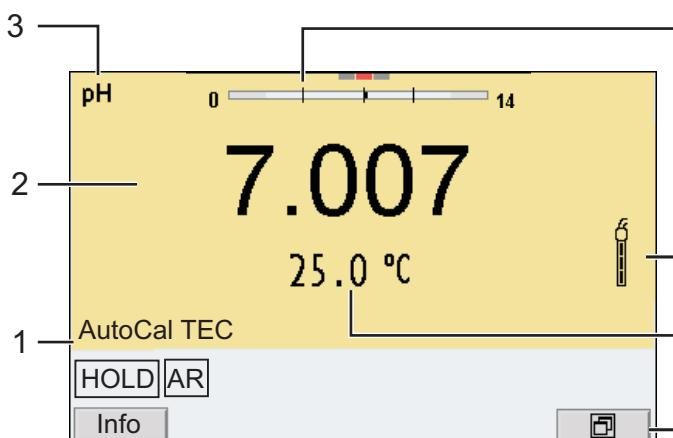Näyttö (esimerkki: pH-mittaus)

4	1	Tilatiedot
2	2	Mittausarvo (yksiköllä)
3	3	Mittaussuure
4	4	Jatkuva mittausarvon valvonta (CMC-toiminto)
5	5	Anturin symboli (kalibroinnin analyysi)
6	6	Lämpötilanmittausarvo (yksiköllä)
7	7	Järjestelmäävaimet ja päivämäärä/kellonaika

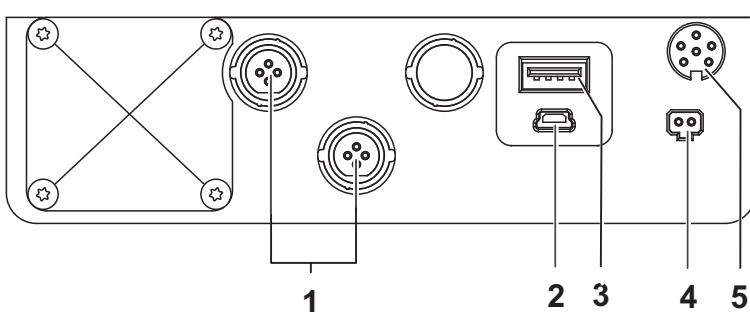Pistokeketä /liitännät

1	IDS anturit (pH, U, johtavuus, happi)
2	USB-B-liitäntä (laite)
3	USB-A-liitäntä (verkkoasema)
4	Liitäntä verkkopistokelaitteelle
5	Huoltoliitäntä

Ensikäyttöönotto

- | | |
|---|---|
| 1 | Kiinnitä verkkopistokelaite. |
| 2 | Kytke mittauslaite päälle painikkeella <On/Off> . |

Varo

Noudata käytettävien antureiden turvallisuusohjeita.

Antureiden käyttöohjeet löytyvät mukanatoimitetulta CD:ltä ja internetistä osoitteesta www.WTW.com.



inoLab® Multi 9620 IDS

Vue d'ensemble

L'appareil de mesure Multi 9620 IDS permet d'effectuer des mesures rapides et fiables (pH, U, ION, conductivité, oxygène).


L'appareil de mesure Multi 9620 IDS offre un maximum de confort de service, de fiabilité et de sécurité de mesure.

Clavier


Les touches sont symbolisées par des parenthèses pointues <..> .

Le symbole de touche (p. ex. <ENTER>) signifie généralement qu'il faut exercer une pression brève (moins de 2 sec). La pression longue (env. 2 sec) est symbolisée par un tiret suivant le symbole de touche (p. ex. <ENTER__>).

<F1>	Fonction dépendante de la situation (s'affiche à l'écran)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Allumer/éteindre l'appareil de mesure
<M>	Sélection de la grandeur de mesure
<CAL>	Appel de la procédure de calibration
<CAL__>	Afficher les données de calibration
<STO>	Enregistrement manuel de la valeur de mesure
<STO__>	Configuration et démarrage de l'enregistrement automatique
<RCL>	Affichage des valeurs de mesure enregistrées
<RCL__>	Affichage des valeurs de mesure enregistrées automatiquement
<▲><▼>	Commande par menu, navigation
<◀><▶>	
<ENTER>	Ouverture du menu pour réglages de mesure / confirmation des entrées
<ENTER__>	Ouverture du menu pour réglages système
<AR>	Gel de la valeur de mesure (fonction HOLD) Désactivation de la mesure AutoRead
<ESC>	Interruption de l'action
<PRT>	Envoi de données à l'interface (USB)
<PRT__>	Configuration et démarrage de la sortie automatique sur USB

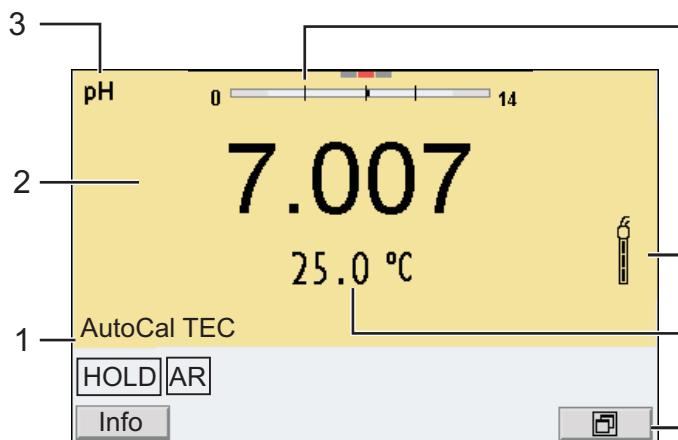Visuel (exemple: mesure de pH)

- | | | |
|---|---|--|
| 4 | 1 | Informations d'état |
| 2 | 2 | Valeur mesurée (avec unité) |
| 3 | 3 | Grandeur de mesure |
| 4 | 4 | Contrôle continu de la valeur de mesure (fonction CMC) |
| 5 | 5 | Symbole de sonde (évaluation de la calibration) |
| 6 | 6 | Valeur de mesure de la température (avec unité) |
| 7 | 7 | Softkeys et date/heure |

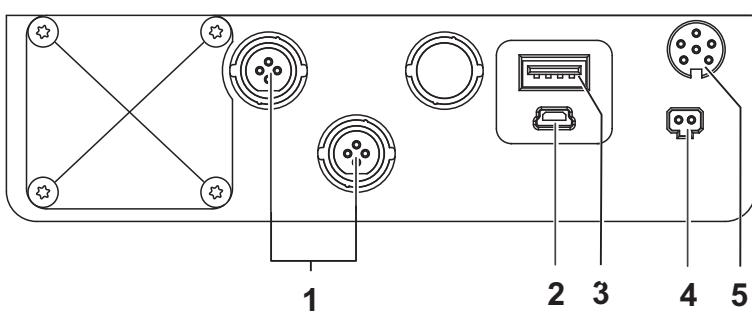Connexions /raccordements

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Sondes IDS
(pH, U, conductivité, oxygène) |
| 2 | 2 | Interface USB-B (Device) |
| 3 | 3 | Interface USB-A (Host) |
| 4 | 4 | Raccordement pour transformateur d'alimentation |
| 5 | 5 | Interface de service |

Première mise en service

- | | |
|---|--|
| 1 | Brancher le transformateur d'alimentation. |
| 2 | Allumer l'appareil de mesure en appuyant sur la touche <On/Off>. |

**Attention**

Veuillez respecter les consignes de sécurité relatives aux sondes utilisées.
Vous trouvez les modes d'emploi relatifs aux sondes sur le CD joint à la livraison et sur Internet à l'adresse www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Áttekintés

A Multi 9620 IDS típusú műszerrel gyorsan és megbízhatóan végezhetők a mérések (pH, U, ION, vezetőképesség, oxigén).


A Multi 9620 IDS műszer a legmagasabb fokú kezelési kényelmet és megbízhatóságot nyújtja, és a legbiztosabb méréseket teszi lehetővé.

A gombok mezője


A gombokat csúcsos zárójelek <..> emelik ki.

A gomb szimbóluma (pl. <ENTER>) általában a gomb rövid (2 másodpercnél rövidebb) idejű lenyomását jelenti. A gomb hosszú idejű (kb. 2 másodpercig tartó) lenyomására a gomb szimbóluma utáni vonás (pl. <ENTER__>) utal.

<F1>	Helyzetfüggő (a kijelzőn megjelenített) funkció
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	A mérőműszer ki-/bekapcsolása
<M>	A méréndő mennyiség megválasztása
<CAL>	A kalibrálási eljárás behívása
<CAL__>	A kalibrálási adatok kijelzése
<STO>	A mért érték manuális mentése
<STO__>	Automatikus mentés konfigurálása és indítása
<RCL>	A manuálisan mentett mérési értékek megjelenítése
<RCL__>	Az automatikusan mentett mérési értékek megjelenítése
<▲><▼>	Menüvezérlés, navigáció
<◀><▶>	
<ENTER>	A mérési beállítások menüpontjainak megnyitása / A bevitt adatok nyugtázása
<ENTER__>	A rendszerbeállítások menüpontjainak megnyitása
<AR>	A mért érték befagyasztása (HOLD funkció) AutoRead-mérés ki-/bekapcsolása
<ESC>	A művelet megszakítása
<PRT>	Az adatok küldése az (USB) portra
<PRT__>	Az adatok USB-re való automatikus kiadásának konfigurálása és elindítása

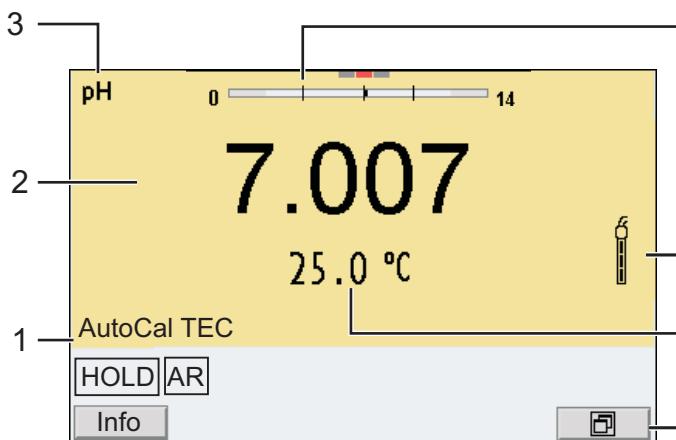Kijelző (példa: pH-mérés)

4	1	Állapo1információk
2	2	Mért érték (mértékegységgel)
3	3	Mérendő mennyiség
4	4	A mért érték folyamatos ellenőrzése (CMC-funkció)
5	5	Az érzékelő jele (kalibráció kiértékelése)
6	6	A hőmérséklet mért értéke (mértékegységgel)
7	7	Softkey gombok és dátum/óraidő

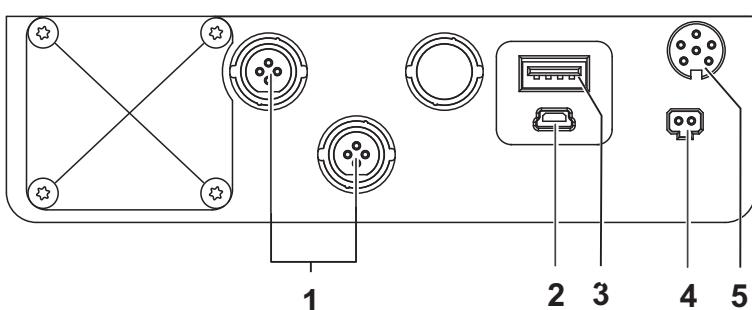Foglalatok mezője / Csatlakozók

1	IDS érzékelők (pH, U, vezetőképesség, oxigén)
2	'B' USB-port (Device)
3	'A' USB-port (Host)
4	Csatlakozó dugaszolható tápegység számára
5	Csatlakozási hely szervizcélokra

Első használatkor

- | | |
|---|---|
| 1 | Csatlakoztassa a dugaszolható tápegységet. |
| 2 | Kapcsolja be a mérőműszert az <On/Off> gombbal. |

**Figyelmeztetés**

Tartsa be az alkalmazott érzékelők biztonsági utasításait.

Az érzékelők kezelési utasításai megtalálhatók a készülékkel együtt kapott CD-lemezen és az interneten a www.WTW.com honlapon.

inoLab® Multi 9620 IDS

Descrizione generale


Con l'apparecchio di misurazione Multi 9620 IDS si possono effettuare misurazioni in modo rapido e affidabile (pH, U, ION, conducibilità, ossigeno). Esso Multi 9620 IDS offre il massimo in fatto di comfort di comando, affidabilità e sicurezza di misurazione.

Tastiera

I tasti sono rappresentati tra parentesi angolate <..>. Il simbolo dei tasti (ad es. <ENTER>) indica di regola una breve pressione (inferiore a 2 secondi). La pressione prolungata (circa 2 secondi) è rappresentata da un trattino posto dopo il simbolo (ad es. <ENTER_>).


<F1>	Funzione a seconda della situazione (visualizzata sul display)
<F1_>	
<F4>	
<F4_>	
<ON/OFF>	Accensione/spegnimento dello strumento di misurazione
<M>	Selezione dell'unità di misurazione
<CAL>	Richiamo della procedura di calibrazione
<CAL_>	Visualizzazione dei dati di calibrazione
<STO>	Memorizzazione manuale del valore della misurazione
<STO_>	Configurazione e avvio della memorizzazione automatica
<RCL>	Visualizzazione dei valori di misurazione memorizzati manualmente
<RCL_>	Visualizzazione dei valori di misurazione memorizzati automaticamente
<▲><▼>	Gestione menu, navigazione
<◀><▶>	
<ENTER>	Apertura del menu per le impostazioni della misurazione / conferma immissioni
<ENTER_>	Apertura del menu per le impostazioni del sistema
<AR>	Blocco del valore di misurazione (funzione HOLD) Inserimento/disinserimento della misurazione AutoRead
<ESC>	Interruzione dell'azione
<PRT>	Trasmissione dei dati all'interfaccia (USB)
<PRT_>	Configurazione e avvio dell'emissione automatica all'USB

Display (ad esempio: misurazione pH)

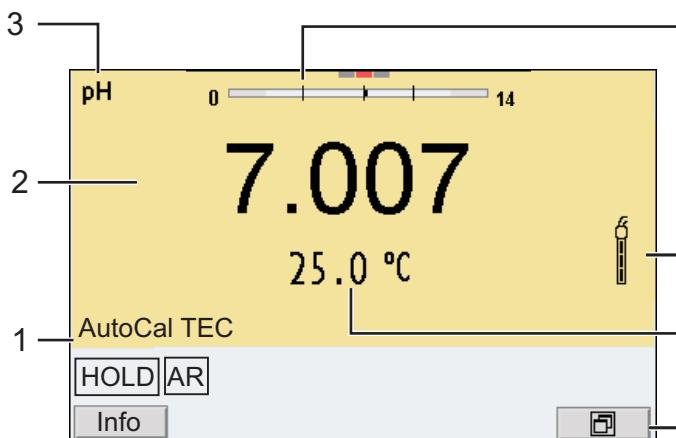

- | | |
|---|---|
| 3 | Informazioni di stato |
| 4 | Valore di misurazione (con unità) |
| 5 | Unità di misurazione |
| 6 | Continuo controllo dei valori di misurazione (funzione CMC) |
| 7 | Icona del sensore (valutazione della calibrazione) |
| 8 | Valore di misurazione della temperatura (con unità) |
| 9 | Softkey e data/ora |

Pannello prese /allacciamenti

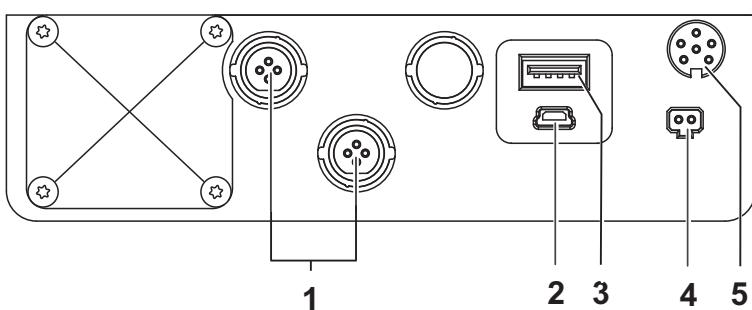

- | | |
|---|---|
| 1 | Sensori IDS
(pH, U, conducibilità, ossigeno) |
| 2 | Interfaccia USB-B (Device) |
| 3 | Interfaccia USB-A (Host) |
| 4 | Allacciamento per l'alimentatore a spina |
| 5 | Interfaccia di servizio |

Prima messa in funzione

- | | |
|---|--|
| 1 | Innestare l'alimentatore. |
| 2 | Accendere lo strumento di misurazione con il tasto <ON/OFF>. |



Attenzione

Osservare le avvertenze di sicurezza relative ai sensori utilizzati.
Le istruzioni per l'uso dei sensori sono contenute nel CD fornito in dotazione oppure si trovano alla pagina www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

概要

この測定器 Multi 9620 IDS は、すばやく正確に（pH、U、ION、伝導度、酸素）を測定することができます。

測定器 Multi 9620 IDS は、最大限の操作快適性、信頼性および測定確実性を提供します。


キーパッド

個々のキー名は山括弧 <..> に入れて表記されています。

キーシンボル（例：<ENTER>）は原則として短く押すものとします（2秒未満）。長く押す（約2秒）場合は、キーシンボルの後ろにアンダーバーを付けています（例：<ENTER_>）。


<F1>	状況に応じた機能（ディスプレイに表示）
<F1_>	
<F4>	
<F4_>	
<On/Off>	測定器をオン / オフする
<M>	測定量を選択する
<CAL>	キャリブレーション手順を呼び出す
<CAL_>	キャリブレーションデータを表示する
<STO>	測定値を手動保存する
<STO_>	自動保存を設定し、開始する
<RCL>	手動保存した測定値を表示する
<RCL_>	自動保存した測定値を表示する
<▲><▼>	メニュー制御、ナビゲーション
<◀><▶>	
<ENTER>	測定設定メニューを開く / 入力を確定する
<ENTER_>	システム設定メニューを開く
<AR>	測定値をフリーズする（HOLD機能） AutoRead 測定をオン / オフする
<ESC>	動作を中断する
<PRT>	データをインターフェース（USB）に送る
<PRT_>	USBへの自動出力を設定し、開始する

ディスプレイ（例：pH 測定）

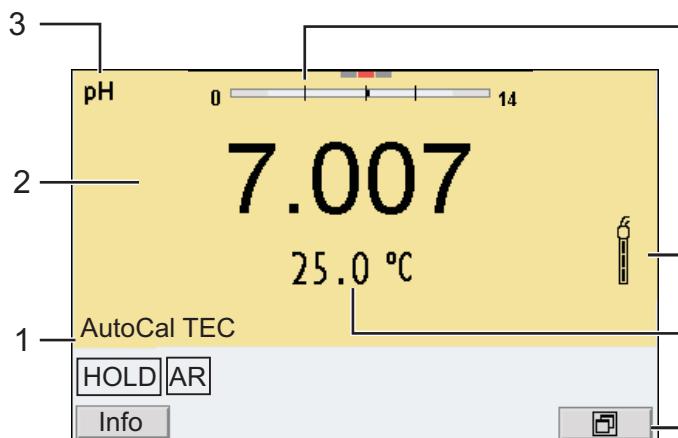

4	1	ステータス情報
2	2	測定値（単位付き）
3	3	測定量
4	4	連続測定値点検（CMC 機能）
5	5	センサーシンボル (キャリブレーション評価)
6	6	温度測定値（単位付き）
7	7	ソフトキーおよび日付 / 時刻

ソケットエリア / 接続部

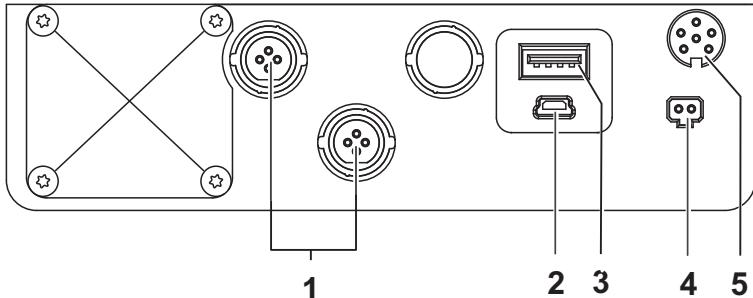

1	IDS センサー (pH、U、伝導度、酸素)
2	USB-B インターフェース (デバイス)
3	USB-A インターフェース (ホスト)
4	プラグイン電源ユニット接続部
5	サービスインターフェース

初回使用時

1	プラグイン電源ユニットを接続してください。
2	測定器をキー <On/Off> でオンにします。



注意

使用しているセンサーの安全に関する注意事項を順守してください。
センサーの取扱説明書は、同梱の CD に収録されています。
また www.WTW.com で閲覧することもできます。

inoLab® Multi 9620 IDS

개요

측정기 Multi 9620 IDS 를 이용하면 빠르고 정확한 측정 (pH, U, ION, 전도성, 산소) 이 가능합니다.

측정기 Multi 9620 IDS 은 뛰어난 조작 편이성과 신뢰성, 그리고 정확성을 자랑합니다.


키패드

키는 꺽쇠 괄호 <..> 로 표시됩니다.

키 심볼 (예: <ENTER>)은 일반적으로 짧게 누르는 것을 의미합니다 (2 초이내). 길게 눌러야 하는 경우 (약 2 초) 에는 키 심볼 뒤에 밑줄이 표시됩니다 (예 : <ENTER>).


<F1> <F1__> <F4> <F4__>	상황 관련 기능 (디스플레이에 표시됨)
<On/Off>	측정기 켜기 / 끄기
<M>	측정량 선택하기
<CAL> <CAL__>	캘리브레이션 절차 불러오기 캘리브레이션 데이터 표시하기
<STO> <STO__>	측정값 수동으로 저장하기 자동 저장 설정하고 시작하기
<RCL> <RCL__>	수동으로 저장한 측정값 표시하기 자동으로 저장된 측정값 표시하기
<▲><▼> <◀><▶>	메뉴 조작, 방향 설정
<ENTER> <ENTER__>	측정 설정을 위한 메뉴 열기 / 입력 확인하기 시스템 설정을 위한 메뉴 열기
<AR>	측정값 정지시키기 (HOLD - 기능) AutoRead- 측정 켜기 / 끄기
<ESC>	작업 취소하기
<PRT> <PRT__>	인터페이스 (USB)로 데이터 전송하기 USB에 자동 출력 설정하고 시작하기

디스플레이 (예 : pH- 측정)

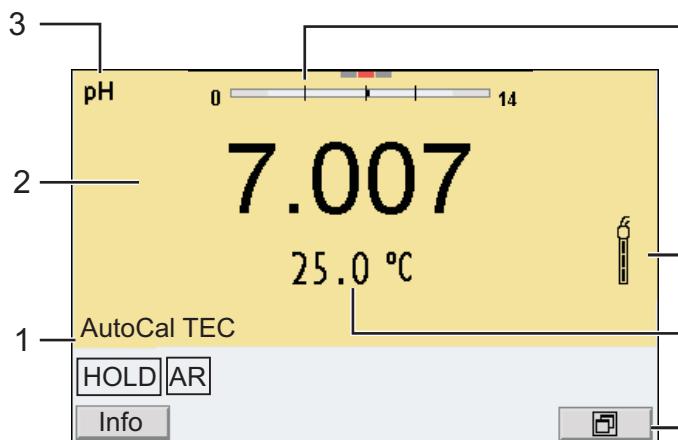

4	1	상태 정보
2	2	측정값 (단위 포함)
3	3	측정량
4	4	지속적 측정값 감시 (CMC- 기능)
5	5	센서 심볼 (캘리브레이션 평가)
6	6	온도 측정값 (단위 포함)
7	7	소프트키 및 날짜 / 시간

소켓패널 / 연결포트

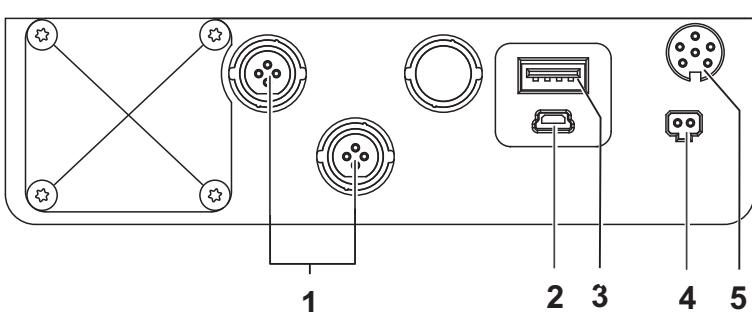

1	IDS 센서 (pH, U, 전도성, 산소)
2	USB-B- 인터페이스 (Device)
3	USB-A- 인터페이스 (Host)
4	컨넥터 메인 유닛용 연결포트
5	서비스 인터페이스

최초 사용

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | 컨넥터 메인 유닛을 끼우십시오 . |
| 2 | <On/Off> 키를 눌러 측정기를 켜십시오 . |



주의

사용된 센서의 주의사항에 유의하십시오 .
센서에 관한 사용설명서는 함께 제공되는 CD 또는 홈페이지
www.WTW.com에서 찾아볼 수 있습니다 .

inoLab® Multi 9620 IDS

Overzicht

Met het meetapparaat Multi 9620 IDS kunt u snel en betrouwbaar metingen (pH, U, ION, geleidingsvermogen, zuurstof) uitvoeren.

Het meetapparaat Multi 9620 IDS biedt een maximum aan bedieningscomfort, betrouwbaarheid en meetzekerheid.


Keypad

Toetsen worden door puntige haakjes <..> aanschouwelijk gemaakt.

Het toetssymbool (bijv. <ENTER>) betekent over het algemeen een korte druk op de toets (korter dan 2 sec). Een langere druk op de toets (ca. 2 sec) wordt door een streep achter het toetssymbool (bijv. <ENTER__>) aanschouwelijk gemaakt.


<F1>	Situatieafhankelijke functie (wordt op het display weergegeven)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Meettoestel in-/uitschakelen
<M>	Meetgrootte selecteren
<CAL>	Kalibreermethode oproepen
<CAL__>	Kalibreergegevens weergeven
<STO>	Meetwaarde handmatig opslaan
<STO__>	Automatische opslag configureren en starten
<RCL>	Handmatig opgeslagen meetwaarden weergeven
<RCL__>	Automatisch opgeslagen meetwaarden weergeven
<▲><▼>	Menubesturing, navigatie
<◀><▶>	
<ENTER>	Menu voor meetinstellingen openen / invoer bevestigen
<ENTER__>	Menu voor systeeminstellingen openen
<AR>	Meetwaarde bevriezen (HOLD - functie) AutoRead-meting in-/uitschakelen
<ESC>	Actie afbreken
<PRT>	Gegevens naar de interface (USB) sturen
<PRT__>	Automatische output op USB configureren en starten

Display (voorbeeld: pH-meting)

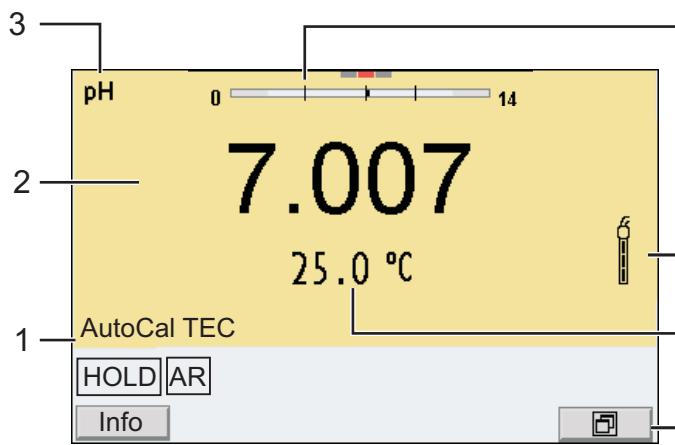

1	Statusinformatie
2	Meetwaarde (met eenheid)
3	Meetgrootte
4	Continue meetwaardecontrole (CMC-functie)
5	Sensorsymbool (kalibreerevaluatie)
6	Temperatuur-meetwaarde (met eenheid)
7	Softkeys en datum/tijd

Bussenveld / aansluitingen

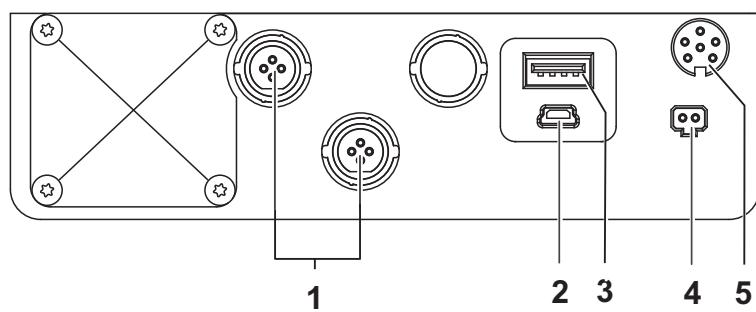

1	IDS sensoren (pH, U, geleidingsvermogen, zuurstof)
2	USB-B-interface (Device)
3	USB-A-interface (Host)
4	Aansluiting voor stekkerneentransformator
5	Service-interface

Eerste inbedrijfname

- | | |
|---|--|
| 1 | De stekkerneentransformator opsteken. |
| 2 | Meettoestel met de toets <On/Off> inschakelen. |



Voorzichtig
Neem de veiligheidsaanwijzingen voor de gebruikte sensoren in acht.
De handleidingen voor de sensoren vindt u op de meegeleverde cd en op internet op www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Oversikt

Med måleren Multi 9620 IDS kan du utføre raske og pålitelige målinger (pH, U, ION, ledeevne, oksygen).

Med måleren Multi 9620 IDS er du sikret maksimal betjeningskomfort, pålitelighet og målenøyaktighet.


Knapper

Knappene vises av hakeparenteser <..>.

Knappsymbolet (for eksempel <ENTER>) betyr vanligvis et kort trykk på knappen (under to sekunder). Et langt knappetrykk (ca. 2 sek) vises av en strek under knappesymbolet (f.eks. <ENTER__>).


<F1>	Situasjonsavhengig funksjon (vises på displayet)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Slå måleren på/av
<M>	Velge målestørrelse
<CAL>	Hente frem kalibreringsprosedyren
<CAL__>	Vise kalibreringsdata
<STO>	Lagre måleverdien manuelt
<STO__>	Konfigurere og starte automatisk lagring
<RCL>	Vise manuelt lagrede måleverdier
<RCL__>	Vise automatisk lagrede måleverdier
<▲><▼>	Menystyring, navigering
<◀><▶>	
<ENTER>	Åpne menyen for måleinnstillingen / Bekrefte inntasting
<ENTER__>	Åpne menyen for systeminnstillingen
<AR>	Fryse måleverdi (HOLD-funksjon) Slå AutoRead-måling på/av
<ESC>	Avbryte handling
<PRT>	Sende data til grensesnittet (USB)
<PRT__>	Konfigurere og starte automatisk sending til USB

Display (eksempel: pH-måling)

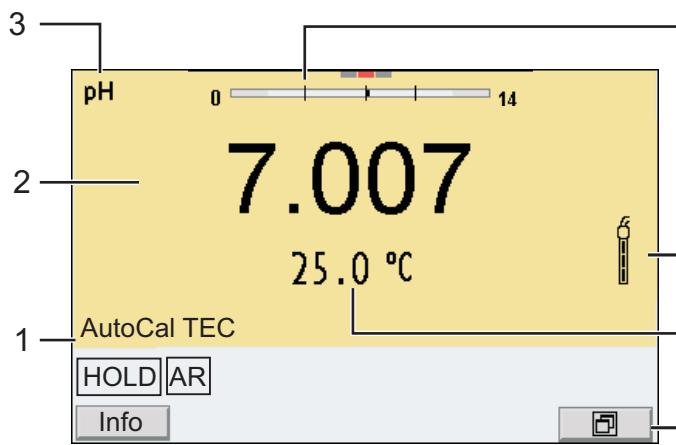

- | | | |
|---|---|--|
| 4 | 1 | Statusinformasjon |
| 2 | 2 | Måleverdi (med enhet) |
| 3 | 3 | Målestørrelse |
| 4 | 4 | Kontinuerlig måleverdikontroll
(CMC-funksjon) |
| 5 | 5 | Følersymbol
(kalibreringsanalyse) |
| 6 | 6 | Temperaturmåleverdi (med enhet) |
| 7 | 7 | Programtaster og dato/tid |

Kontaktpanel/tilkoblinger

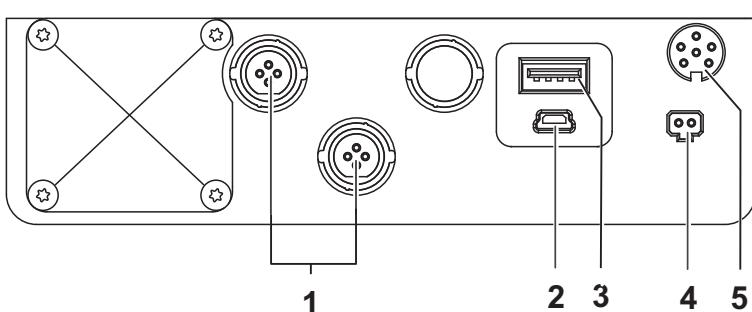

- | | |
|---|--|
| 1 | IDS følere
(pH, U, ledeevne, oksygen) |
| 2 | USB-B-grensesnitt (Device) |
| 3 | USB-A-grensesnitt (Host) |
| 4 | Tilkobling for strømforsyning |
| 5 | Servicegrensesnitt |

Første gangs bruk

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Koble til strømforsyningen. |
| 2 | Slå på måleren med knappen <On/Off> . |



Forsiktig
Les sikkerhetsinstruksene for følerne som brukes.
Du finner bruksanvisning for følerne på CD-platen som fulgte med og på nettsiden www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS


Informacje ogólne

Za pomocą urządzenia pomiarowego Multi 9620 IDS można szybko i niezawodnie wykonywać pomiary (pH, U, ION, przewodności, tlenu). Urządzenie pomiarowe Multi 9620 IDS zapewnia najwyższy poziom komfortu obsługi, niezawodności i dokładności pomiarowej.


Klawiatura

Nazwy klawiszy umieszczone w nawiasach ostrokatnych <...>. Symbol klawisza (n p. <ENTER>) oznacza zasadniczo obsługę krótkie naciśnięcie klawisza (poniżej 2 s). Długie naciśnięcie klawisza (ok. 2 s) wskazywane jest za pomocą kreski za symbolem klawisza (n p. <ENTER__>).

<F1>	Funkcja zależna od sytuacji (jest wyświetlana na wyświetlaczu)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Włączanie/wyłączanie miernika
<M>	Wybór mierzonej wielkości
<CAL>	Uruchamianie procedury kalibracji
<CAL__>	Wyświetlanie danych kalibracji
<STO>	Ręczne zapisywania wartości pomiaru
<STO__>	Konfiguracja i uruchamianie automatycznego zapisywania
<RCL>	Wyświetlanie zapisanych ręcznie wartości pomiarowych
<RCL__>	Wyświetlanie zapisanych automatycznie wartości pomiarowych
<▲><▼>	Sterowanie menu, nawigacja
<◀><▶>	
<ENTER>	Otwieranie menu ustawień pomiaru/potwierdzanie wpisów
<ENTER__>	Otwieranie menu ustawień systemowych
<AR>	Wstrzymywanie wartości pomiaru (funkcja HOLD) Włączanie/wyłączanie pomiaru AutoRead
<ESC>	Anulowanie czynności
<PRT>	Przesyłanie danych do interfejsu (USB)
<PRT__>	Konfiguracja i uruchamianie automatycznego przesyłania do USB

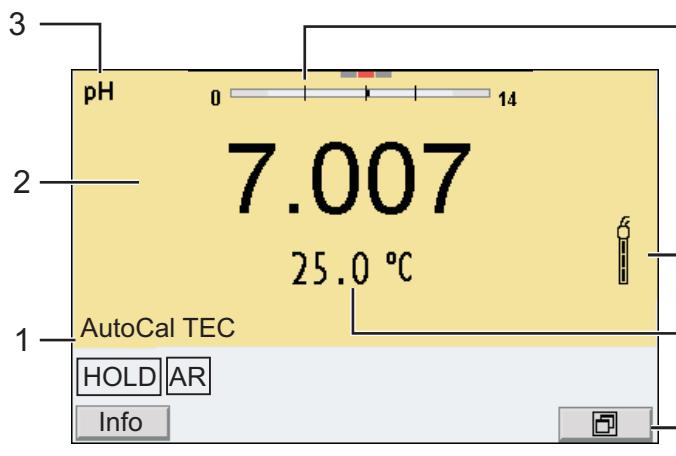Wyświetlacz(przykład: pomiar pH)

- | | | |
|---|---|--|
| 4 | 1 | Informacje statusu |
| 2 | 2 | Wartość pomiaru (z jednostką) |
| 3 | 3 | Mierzona wielkość |
| 4 | 4 | Ciągła kontrola wartości pomiaru (funkcja CMC) |
| 5 | 5 | Symbol czujnika (ocena kalibracji) |
| 6 | 6 | Wartość pomiaru temperatury (z jednostką) |
| 7 | 7 | Przyciski programowe oraz data/godzina |

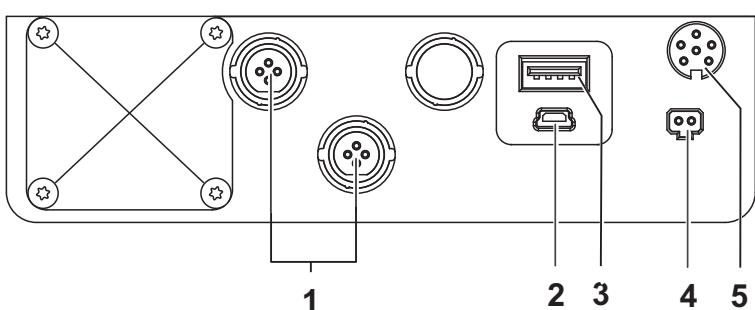Panel gniazd/przyłącza

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Czujniki IDS (pH, U, przewodność, tlen) |
| 2 | 2 | Interfejs USB B (Device) |
| 3 | 3 | Interfejs USB A (Host) |
| 4 | 4 | Przyłącze zasilacza sieciowego |
| 5 | 5 | Złącze serwisowe |

Uruchamianie po raz pierwszy

- | | |
|---|--|
| 1 | Podłączyć zasilacz. |
| 2 | Włączyć miernik za pomocą klawisza <On/Off>. |

**Uwaga**

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dot. stosowanych czujników.
Instrukcje obsługi czujników można znaleźć na załączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Visão geral


Com o aparelho de medição Multi 9620 IDS, pode efectuar medições (pH, U, ION, condutibilidade, oxigénio) de forma rápida e fiável.

O aparelho de medição Multi 9620 IDS proporciona um conforto de utilização, fiabilidade e segurança de medição máximos.


Teclado

As teclas encontram-se exemplificadas através de parênteses angulares <..>. O símbolo de tecla (por ex. <ENTER>) significa geralmente uma breve pressão na tecla (menos de 2 s). Uma pressão prolongada na tecla (aprox. 2 s) encontra-se exemplificada através de um traço de sublinhado depois do símbolo de tecla (por ex. <ENTER>).

<F1>	Função consoante a situação (é apresentada no visor)
< <u>F1</u> >	
<F4>	
< <u>F4</u> >	
<On/Off>	Ligar/desligar aparelho de medição
<M>	Seleccionar grandeza a medir
<CAL>	Chamar processo de calibração
< <u>CAL</u> >	Visualizar dados de calibração
<STO>	Memorizar manualmente o valor medido
< <u>STO</u> >	Configurar e iniciar a memorização automática
<RCL>	Apresentar os valores medidos memorizados manualmente
< <u>RCL</u> >	Apresentar os valores medidos memorizados automaticamente
<▲><▼>	Comando por menu, navegação
<◀><▶>	
<ENTER>	Abrir menu para configurações de medição / confirmar entradas
< <u>ENTER</u> >	Abrir menu para configurações do sistema
<AR>	Congelar valor medido (função HOLD) Ligar/desligar medição AutoRead
<ESC>	Interromper acção
<PRT>	Enviar dados à interface (USB)
< <u>PRT</u> >	Configurar e iniciar a saída automática para a USB

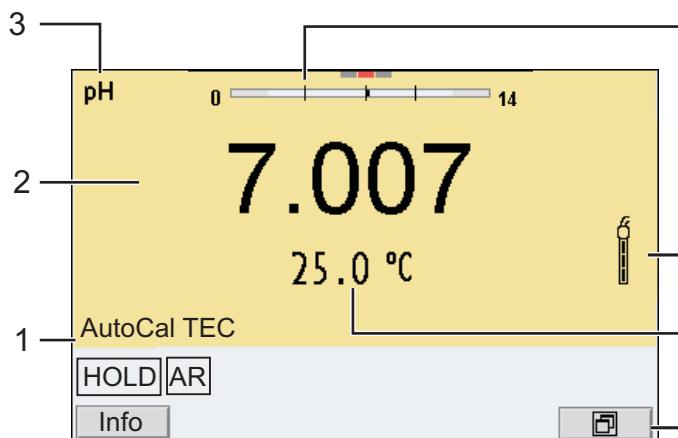Vvisor (exemplo: medição pH)

- | | | |
|---|---|--|
| 4 | 1 | Informações de estado |
| 2 | 2 | Valor medido (com unidade) |
| 3 | 3 | Grandeza medida |
| 4 | 4 | Controlo contínuo do valor medido (função CMC) |
| 5 | 5 | Símbolo de sensor (avaliação da calibração) |
| 6 | 6 | Valor medido da temperatura (com unidade) |
| 7 | 7 | Softkeys e data/hora |

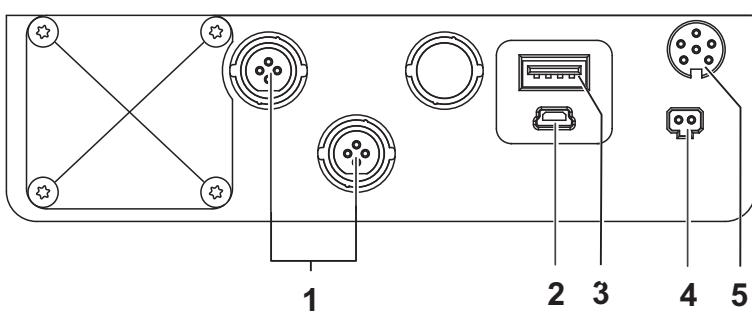Painel de tomadas /ligações

- | | |
|---|---|
| 1 | Sensores IDS (pH, U, condutibilidade, oxigénio) |
| 2 | Interface USB-B (Device) |
| 3 | Interface USB-A (Host) |
| 4 | Ligaçāo para aparelho de alimentação por ficha |
| 5 | Interface de manutenção |

Primeira colocação em funcionamento

- 1 Estabelecer a ligação do aparelho de alimentação por ficha.
- 2 Ligar o aparelho de medição através da tecla <On/Off> .

**Atenção**

Respeite as indicações de segurança relativas aos sensores utilizados. As instruções de utilização dos sensores encontram-se no CD fornecido juntamente ou na Internet em www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Vedere de ansamblu

Cu instrumentul de măsură Multi 9620 IDS puteți efectua rapid și sigur măsurători(pH, U, ION, conductibilitate, oxigen).

Instrumentul de măsură Multi 9620 IDS oferă maximum de ușurință la utilizare, siguranță și precizie.


Tastatura

Tastele sunt reprezentate prin paranteze în unghi <..>.

Simbolul tastei (de exemplu <ENTER>) semnifică în general o apăsare scurtă a tastei (mai puțin de 2 sec). O apăsare lungă a tastei (cca. 2 sec) este reprezentată printr-o liniuță după simbolul tastei (de ex. <ENTER_>).


<F1>	Funcție dependentă de context (este afișată pe Display)
<F1_>	
<F4>	
<F4_>	
<On/Off>	Conectarea/deconectarea instrumentului de măsură
<M>	Selectarea valorilor de măsurare
<CAL>	Accesarea procedeului de calibrare
<CAL_>	Afișarea datelor de calibrare
<STO>	Salvarea manuală a valorii măsurate
<STO_>	Configurarea și inițierea salvării automate
<RCL>	Afișarea valorilor salvate manual
<RCL_>	Afișarea valorilor salvate automat
<▲><▼>	Gestionarea meniului, navigare
<◀><▶>	
<ENTER>	Deschiderea meniului pentru reglarea măsurătorilor /
<ENTER_>	Confirmarea intrărilor
	Deschiderea meniului pentru reglarea sistemului
<AR>	Blocarea valorii măsurate (funcția HOLD)
	Activarea / dezactivarea măsurătorii AutoRead
<ESC>	Anularea acțiunii
<PRT>	Transmiterea datelor la interfață (USB)
<PRT_>	Configurarea și inițierea ieșirii automate la USB

Display (Exemplu: măsurare pH)

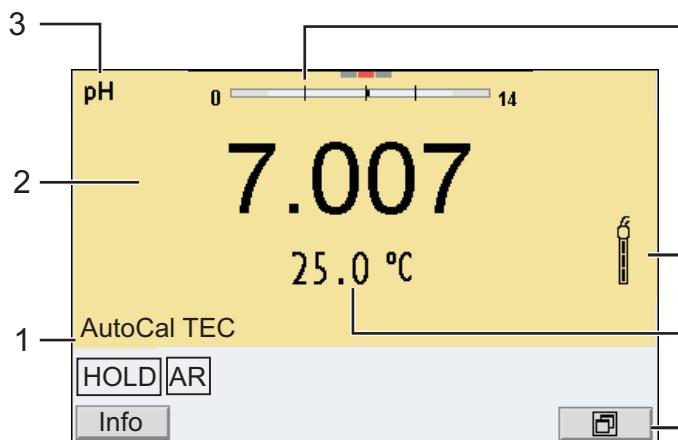

1	Informații status
2	Valoare măsurată (cu aparat)
3	Mărimea de măsurare
4	Verificarea constantă a valorilor măsurate (funcția CMC)
5	Simbolul senzorului (evaluarea calibrării)
6	Valoarea temperaturii (cu aparat)
7	Taste funcționale și data/ora

Zona fișelor /Conexiuni

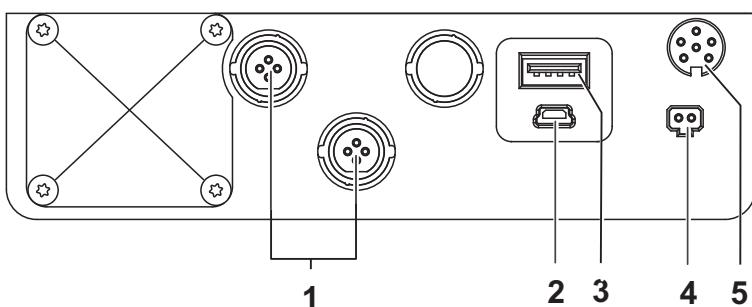

1	Senzori IDS (pH, U, conductibilitate, oxigen)
2	Interfață USB-B (dispozitiv)
3	Interfață USB-A (gazdă)
4	Conexiune pentru rețeaua electrică
5	Interfață service

Punerea inițială
în funcțiune

- | | |
|---|--|
| 1 | Aprindeți rețeaua electrică. |
| 2 | Porniți instrumentul de măsură cu tasta <On/Off> . |

Atenție

Respectați recomandările de siguranță pentru senzorii utilizați.
Instrucțiunile de utilizare a senzorilor sunt disponibile pe CD-ul livrat cu instrumentul de măsură sau pe Internet, la adresa www.WTW.com.



inoLab® Multi 9620 IDS

Обзор

Этот прибор Multi 9620 IDS позволяет быстро и надёжно выполнить различные измерения (значение pH, U, ION, проводимость растворов, содержание кислорода).

Измерительный прибор Multi 9620 IDS обеспечивает максимум удобства, надёжности и точности в работе.


Кнопочная панель

Названия кнопок выделены угловыми скобками <..>.

Значок кнопки (например, <ENTER>) означает короткое нажатие кнопки (менее 2 с). Продолжительное нажатие кнопки (ок. 2 с) обозначается знаком подчёркивания вслед за значком кнопки (например <ENTER>).


<F1>	Функция, зависящая от ситуации (отображается на дисплее)
<F1_>	
<F4>	
<F4_>	
<On/Off>	Включить/выключить измерительный прибор
<M>	Выбрать измеряемый параметр
<CAL>	Вызвать способ калибровки
<CAL_>	Показать калибровочные данные
<STO>	Сохранить результат измерения вручную
<STO_>	Настроить и запустить автоматическое сохранение
<RCL>	Показать результаты измерения, сохраненные вручную
<RCL_>	Показать результаты измерения, сохраненные в автоматическом режиме
<▲><▼>	Управление меню, навигация
<◀><▶>	
<ENTER>	Открыть меню настроек измерения/подтвердить ввод значений
<ENTER_>	Открыть меню системных настроек
<AR>	Удержание результата измерения (функция HOLD) Включить/выключить измерение AutoRead
<ESC>	Отменить действие
<PRT>	Отправить данные на интерфейс (USB)
<PRT_>	Настроить и запустить автоматический вывод на USB

Дисплей (например: измерение pH)

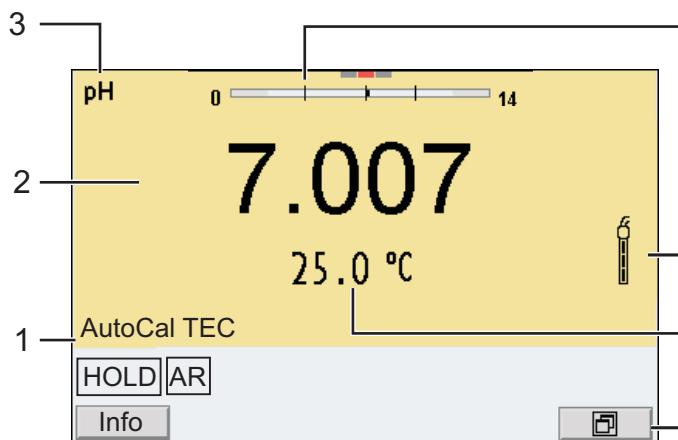

1	Информация о статусе
2	Результат измерения (с единицей измерения)
3	Измеряемый параметр
4	Непрерывный контроль результатов измерения (функция СМС)
5	Символ датчика (обработка калибровочных данных)
6	Результат измерения температуры (с единицей измерения)
7	Программируемые клавиши и дата/время

Гнёзда/разъёмы

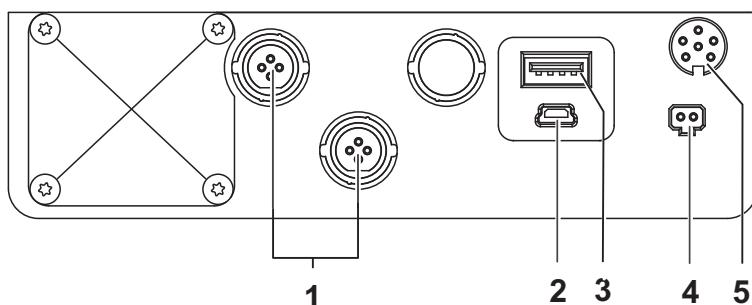

1	IDS датчики (значение pH, U, проводимость растворов, содержание кислорода)
2	Разъём USB-B (устройство)
3	Разъём USB-A (хост)
4	Разъём для подключения блока питания
5	Служебный интерфейс

Первый ввод в эксплуатацию

- | | |
|---|--|
| 1 | Подключите блок питания. |
| 2 | Включите прибор с помощью кнопки <On/Off>. |



Осторожно

Соблюдайте указания по технике безопасности для используемых датчиков.

Руководства по эксплуатации датчиков см. на компакт-диске (входит в комплект поставки) и в интернете на www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Prehľad

Meračom Multi 9620 IDS môžete rýchlo a spoloahlivo merať (pH, U, ION, vodivosť, rozpustený kyslík).

Merač Multi 9620 IDS ponúka v maximálnej miere komfort obsluhy a ovládania, spoľahlivosť a bezpečnosť merania.


Tlačidlá

Tlačidlá sú označené špicatými zátvorkami <..>.

Tlačidlový symbol (napr. <ENTER>) všeobecne znamená krátke stlačenie tlačidla (kratšie než 2 s). Dlhé stlačenie tlačidla (cca 2 s) je znázornené čiarkou za symbolom tlačidla (napr. <ENTER__>).


<F1>	Situáčne závislá funkcia (indikuje sa na displeji)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Zapnutie/vypnutie prístroja
<M>	Voľba meranej veličiny
<CAL>	Vyvolanie kalibrácie
<CAL__>	Zobrazenie kalibračných údajov
<STO>	Ručné uloženie nameranej hodnoty
<STO__>	Nakonfigurovať a spustiť automatické ukladanie
<RCL>	Zobrazenie ručne uložených nameraných hodnôt
<RCL__>	Zobrazenie automaticky uložených nameraných hodnôt
<▲><▼>	Nastavovanie a navigácia v ponukách
<◀><▶>	
<ENTER>	Otvorenie ponuky meračských nastavení / potvrdenie zadania
<ENTER__>	Otvorenie ponuky systémových nastavení
<AR>	Zmrazenie nameranej hodnoty (funkcia HOLD) Zapnutie / vypnutie merania s automatickým odčítaním
<ESC>	Zrušenie akcie
<PRT>	Vyslanie dát na rozhranie (USB)
<PRT__>	Konfigurácia a spustenie automatického výstupu na rozhranie USB

Displej (príklad: meranie pH)

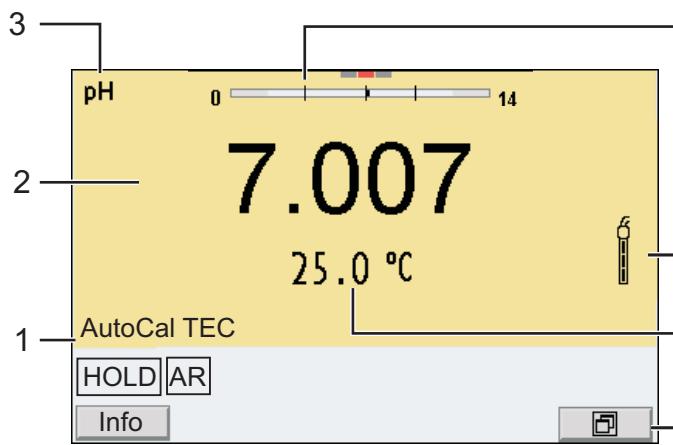

- | | | |
|---|---|---|
| 4 | 1 | Stavové informácie |
| 2 | 2 | Nameraná hodnota (s jednotkou) |
| 3 | 3 | Merná veličina |
| 4 | 4 | Nepretržitá kontrola meranej veličiny (funkcia CMC) |
| 5 | 5 | Symbol senzora (vyhodnotenie kalibrácie) |
| 6 | 6 | Teplota merania (s jednotkou) |
| 7 | 7 | Programovateľné funkčné tlačidlá a dátum/čas |

Zásuvky / prípojky

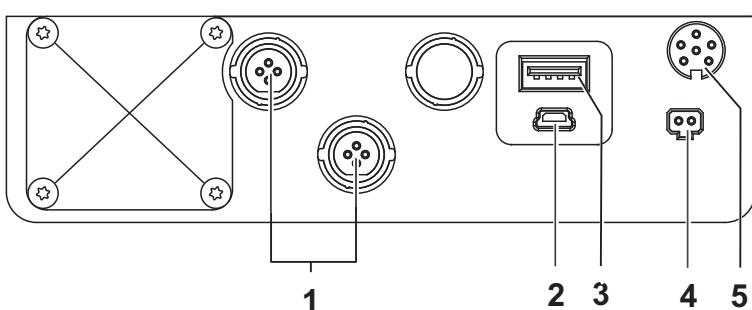

- | | |
|---|--|
| 1 | IDS snímače (pH, U, vodivosť, rozpustený kyslík) |
| 2 | Rozhranie USB-B (prístroj) |
| 3 | Rozhranie USB-A (riadiaci PC) |
| 4 | Prípojka pre zástrčku sietového prístroja |
| 5 | Servisné rozhranie |

Prvé uvedenie do prevádzky

- | | |
|---|--|
| 1 | Zasuňte zástrčku sietového prístroja. |
| 2 | Zapnite merací prístroj tlačidlom <On/Off> . |



Pozor

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre použité senzory.

Návody na obsluhu senzorov nájdete na priloženom CD a na internete na adrese www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Översikt

Med mäteinstrumentet Multi 9620 IDS kan du utföra mätningar (av pH, U, ION, konduktans, syre) snabbt och tillförlitligt.

Mäteinstrumentet Multi 9620 IDS ger maximal manöverkomfort, tillförlitlighet och mätsäkerhet.


Tangentbord

Knapparna åskådliggörs med spetsiga parenteser <..>.


Knappsymbolen (t.ex. <ENTER>) innebär generellt en kort knapptryckning (under 2 s). En lång knapptryckning (ca. 2 s) visas genom ett streck efter knappsymbolen (t.ex. <ENTER_>).

<F1>	Situationsberoende funktion (visas på displayen)
<F1_>	
<F4>	
<F4_>	
<On/Off>	På-/Frånslag av mäteinstrumentet
<M>	Välja mätstorhet
<CAL>:	Öppna kalibrering
<CAL_>	Visa kalibreringsdata
<STO>:	Spara mätvärde manuellt
<STO_>	Konfigurera och starta automatiskt sparande
<RCL>	Visa manuellt sparade mätvärden
<RCL_>	Visa automatiskt sparade mätvärden
<▲><▼>	Menystyrning, navigering
<◀><▶>	
<ENTER>	Öppna menyn för mästinställningar / bekräfta inmatningar
<ENTER_>	Öppna menyn för systeminställningar
<AR>	Frysa mätvärde (HOLD - funktion) På/Frånslag av AutoRead-mätning
<ESC>	Avbryt åtgärd
<PRT>	Sända data till gränssnittet (USB)
<PRT_>	Konfigurera och starta automatisk sändning till USB

Display (exempel: pH-mätning)

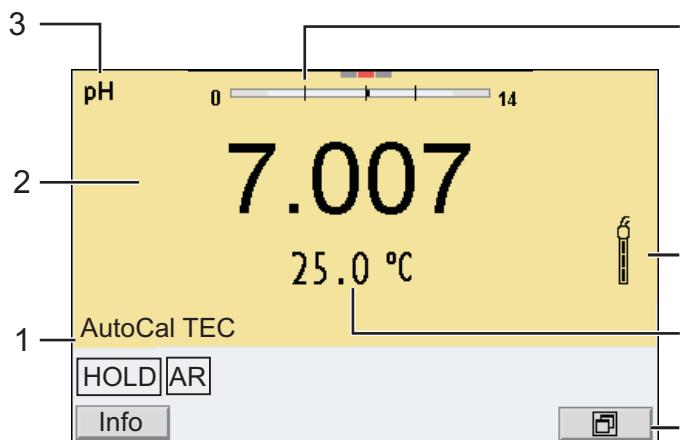

Portområde/anslutningar

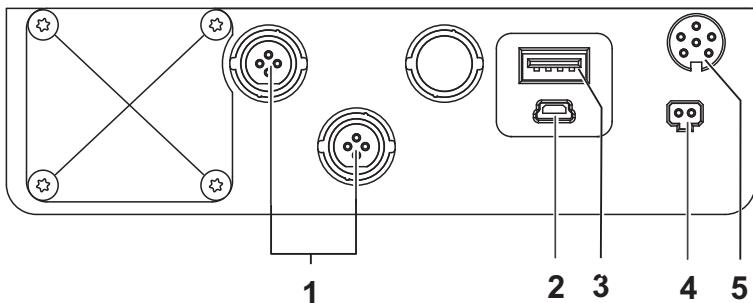

1	IDS givare (pH, U, konduktans, syre)
2	USB-B-gränssnitt (Device)
3	USB-A-gränssnitt (Host)
4	Anslutning för nätaggregat
5	Service-gränssnitt

Första driftsättning

- | | |
|---|--|
| 1 | Anslut nätaggregatet. |
| 2 | Slå på mätinstrumentet med <On/Off>-knappen. |



Försiktig!
Följ noga säkerhetsanvisningarna för givarna du ska använda.
Bruksanvisningarna för givarna finns på medföljande CD och på Internet under www.WTW.com.

inoLab® Multi 9620 IDS

Genel bakış

Multi 9620 IDS ölçüm cihazı ile hızlı ve güvenilir ölçümler (pH, U, ION, iletkenlik, oksijen) yapabilirsiniz.


Ölçüm cihazı Multi 9620 IDS maksimum kullanım konforu, güvenilirlik ve ölçüm hassasiyeti sunar.

Tuş alanı


Tuşlar uçlarından görünür şekilde <..> kenetlenir.

Tuş simbolü (örn. <ENTER>), genel olarak tuşa kısa bir şekilde basma anlamındadır (2 saniyeden az). Tuşa uzun basma (yaklaşık 2 saniye) tuş simbolünün altında bir çizgi (örn. <ENTER__>) ile gösterilir.

<F1>	Duruma bağlı fonksiyon (ekranda gösterilir)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	Ölçüm cihazının açılması/kapatılması
<M>	Ölçülen değişkenin seçilmesi
<CAL>	Kalibrasyon yönteminin çağrılması
<CAL__>	Kalibrasyon verilerinin gösterilmesi
<STO>	Ölçüm değerinin manüel olarak kaydedilmesi
<STO__>	Otomatik kaydın konfigüre edilmesi ve başlatılması
<RCL>	Manüel kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
<RCL__>	Otomatik kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
<▲><▼>	Menü kontrolü, navigasyon
<◀><▶>	
<ENTER>	Ölçüm ayarları için menünün açılması / girişlerin onaylanması
<ENTER__>	Sistem ayarları için menünün açılması
<AR>	Ölçüm değerinin dondurulması (HOLD - fonksiyonu) AutoRead ölçümünün açılması/kapatılması
<ESC>	İşlemin iptal edilmesi
<PRT>	Verilerin arabirimde (USB) gönderilmesi
<PRT__>	Otomatik USB çıkışının konfigüre edilmesi ve başlatılması

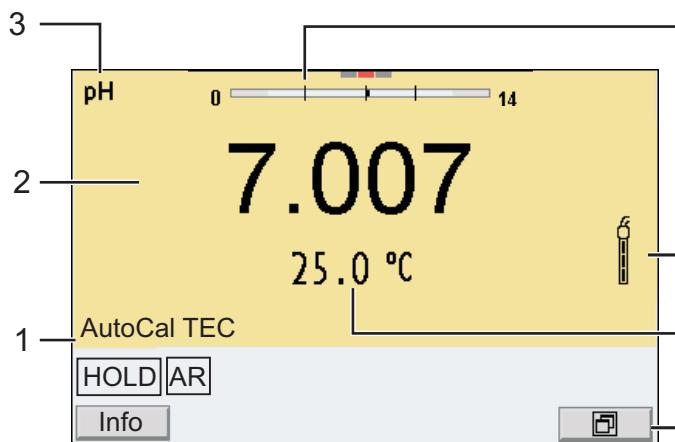Ekran(Örnek: pH-ölçümü)

- | | |
|---|--|
| 1 | Durum bilgileri |
| 2 | Ölçüm değeri (birimli) |
| 3 | Ölçülen değişken |
| 4 | Sürekli ölçüm değeri kontrolü (CMC-fonksiyonu) |
| 5 | Sensör simgesi (kalibrasyon değerlemesi) |
| 6 | Sıcaklık ölçüm değeri (birimli) |
| 7 | Orta menü tuşları ve tarih/saat |

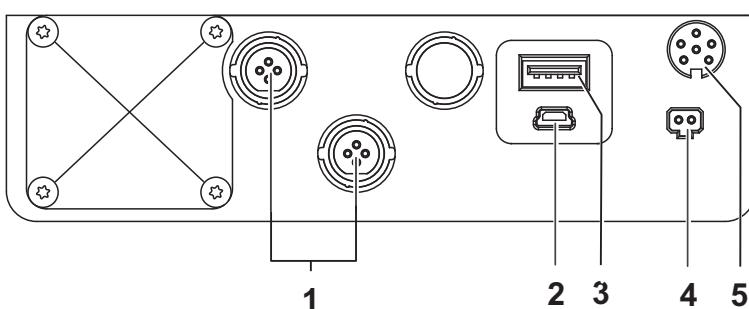Jak sahası /bağlantıları

- | | |
|---|--|
| 1 | IDS sensörler (pH, U, iletkenlik, oksijen) |
| 2 | USB-B-arabirimi (cihaz) |
| 3 | USB-A-arabirimi (sunucu) |
| 4 | Fişli güç kaynağı için bağlantı |
| 5 | Servis arabirimi |

İlk kullanım

- | | |
|---|--|
| 1 | Fişli güç kaynağı takılmalıdır. |
| 2 | <On/Off> tuşu ile ölçüm cihazı açılır. |

**Dikkat**

Kullanılan sensörler için güvenlik uyarılarını dikkate alınız.
Sensörlere ilişkin kullanım kılavuzlarını beraberinde verilen CD'de veya
internette bulabilirsiniz: www.WTW.com adresinde bulabilirsiniz.

inoLab® Multi 9620 IDS

概况

使用测量仪 Multi 9620 IDS 您可以快速、可靠地进行测量 (pH 值、U、ION、电导率、氧气)。

测量仪 Multi 9620 IDS 具有高度的操作舒适性、可靠性和测量安全性。


按键区

按键通过尖括号 <..> 表示。


按键符号 (例如 <ENTER>) 一般表示短时间按下按键 (少于 2 秒)。较长时间按下按键 (约 2 秒) 通过按键符号后的下划线 (例如 <ENTER__>) 表示。

<F1>	与状态有关的功能 (通过显示屏显示)
<F1__>	
<F4>	
<F4__>	
<On/Off>	接通 / 关闭测量仪
<M>	选择测量参数
<CAL>:	调用校准方法
<CAL__>	显示校准数据
<STO>:	手动储存测量值
<STO__>	设置和启动自动储存
<RCL>:	显示手动储存的测量值
<RCL__>	显示自动储存的测量值
<▲><▼>:	菜单操控 , 导航
<◀><▶>:	
<ENTER>	打开测量设置菜单 / 确认输入
<ENTER__>	打开系统设置菜单
<AR>:	冻结测量值 (HOLD 功能)
	开启 / 关闭自动读取测量
<ESC>:	取消处理
<PRT>:	向接口 (USB) 发送数据
<PRT__>	设置和启动 USB 自动输出

显示屏 (例如 : pH 值测量)

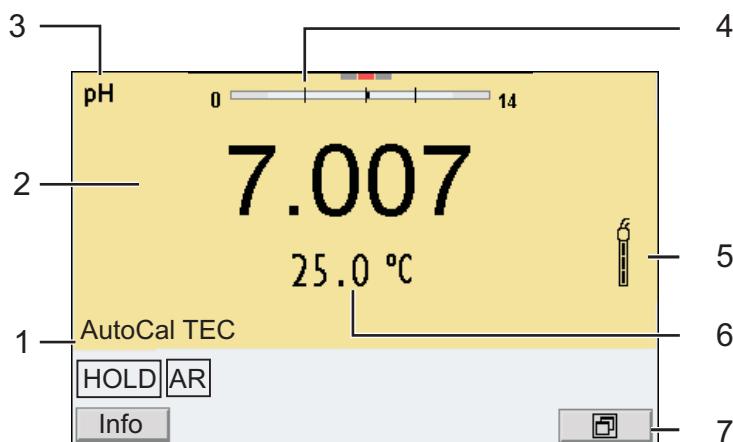

插口区 / 接口

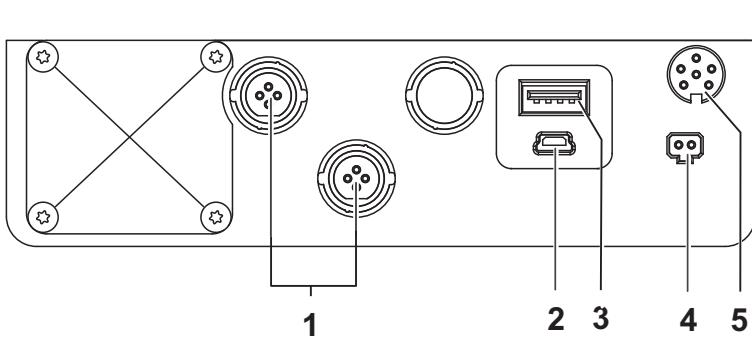

1	IDS 感器 (pH 值、U、电导率、氧气)
2	USB-B- 接口 (装置)
3	USB-A- 接口 (主机)
4	插头组合装置接口
5	保养接口

首次使用

- 1 插上插头组合装置。
- 2 按下按键 <On/Off> 接通测量仪。



小心

注意所用传感器的安全提示。

传感器操作说明可以在随附的 CD 光盘中和互联网地址 www.WTW.com 下找到。

Xylem |'ziləm|

- 1) The tissue in plants that brings water upward from the roots;
- 2) a leading global water technology company.

We're a global team unified in a common purpose: creating advanced technology solutions to the world's water challenges. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and reused in the future is central to our work. Our products and services move, treat, analyze, monitor and return water to the environment, in public utility, industrial, residential and commercial building services settings. Xylem also provides a leading portfolio of smart metering, network technologies and advanced analytics solutions for water, electric and gas utilities. In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications expertise with a strong focus on developing comprehensive, sustainable solutions.

For more information on how Xylem can help you, go to www.xylem.com.



Service and Returns:

Xylem Analytics Germany

Sales GmbH & Co. KG

WTW

Am Achalaich 11

82362 Weilheim

Germany

Tel.: +49 881 183-325

Fax: +49 881 183-414

E-Mail wtw.rma@xylem.com

Internet: www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

