

Bestimmung von Chlorid

Beschreibung

Die Bestimmung des Chlorid Gehaltes erfolgt durch Titration mit wässriger Silbernitrat-Lösung von 0.001 - 0.1 mol/l. Diese Bestimmung ist für wässrige oder wasserlösliche Proben mit Chlorid - Gehalten von unter 1 ppm bis 100% geeignet.

Bei sehr kleinen Chlorid-Gehalten deutlich unter 10 ppm kann es vorteilhaft sein, die Titration in Essigsäure mit einer 0.001 – 0.002 mol/l Silbernitrat-Lösung (gelöst in 90% Essigsäure) durchzuführen.

Die Berechnung erfolgt als mg/l Chlorid.

Geräte

Titration	TL 5000 oder höher
Elektrode	AgCl 62 oder AgCl 62 RG
Kabel	L 1 A
Rührer	Magnetrührer TM 235 oder ähnliche
Laborgeräte	Becherglas 150 ml
	Magnetrührstab 30 mm

Reagenzien

1	Silbernitratlösung 0.001 – 0.1 mol/l
2	Salpetersäure 4 mol/l
3	Polyvinylalkohol – Lösung 0.5%
4	Elektrolytlösung L2114 (KNO ₃ 2 mol/l + KCl 0.001 mol/l)
5	Destilliertes Wasser
Alle Reagenzien sollten mindestens analysenrein sein	

Durchführung der Titration

Reagenzien

Die Titerbestimmung der AgNO_3 - Lösung erfolgt wie in der Applikationsschrift „Titerbestimmung von AgNO_3 “ beschrieben.

Polyvinylalkohol – Lösung 0.5%

0.5 g Polyvinylalkohol werden in 100 ml destilliertem Wasser gelöst.

Reinigung der Elektrode

Die Elektrode wird mit destilliertem Wasser gereinigt. Für die Lagerung der AgCl 62 eignet sich die Elektrolytlösung L2114 Für die AgCl 62 RG kann destilliertes Wasser verwendet werden.

Probenvorbereitung

Die Probe wird in ein 150 ml Becherglas pipettiert und auf etwa 80 ml mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Es werden 0.5 ml 4mol/l HNO_3 und 0.5 – 1 ml Polyvinylalkohollösung 0.5% zugegeben. Anschließend wird mit AgNO_3 – Lösung 0.1 mol/l auf einen Äquivalenzpunkt titriert.


Der Verbrauch sollte bei etwa 5 – 15 ml liegen.

Die Titration kann mit Proben mit Chlorid-Gehalten von wenigen ppm - 100% durchgeführt werden, die Probenmenge muss allerdings angepasst werden. Bei Proben mit kleinen Chlorid-Gehalten unter 200 mg/l sollten AgNO_3 -Lösungen mit 0.02 mol/l oder geringer verwendet werden.

Probenmenge für die Titration mit 0.1 mol/l AgNO_3	
Chlorid-Gehalt [%]	Probenmenge [g]
< 0.1	> 10
0.1 – 1	1 – 10
1 – 10	0.1 – 0.2
10 – 50	0.05 – 0.1
50 - 100	0.05

Titrationparameter

Probentitration

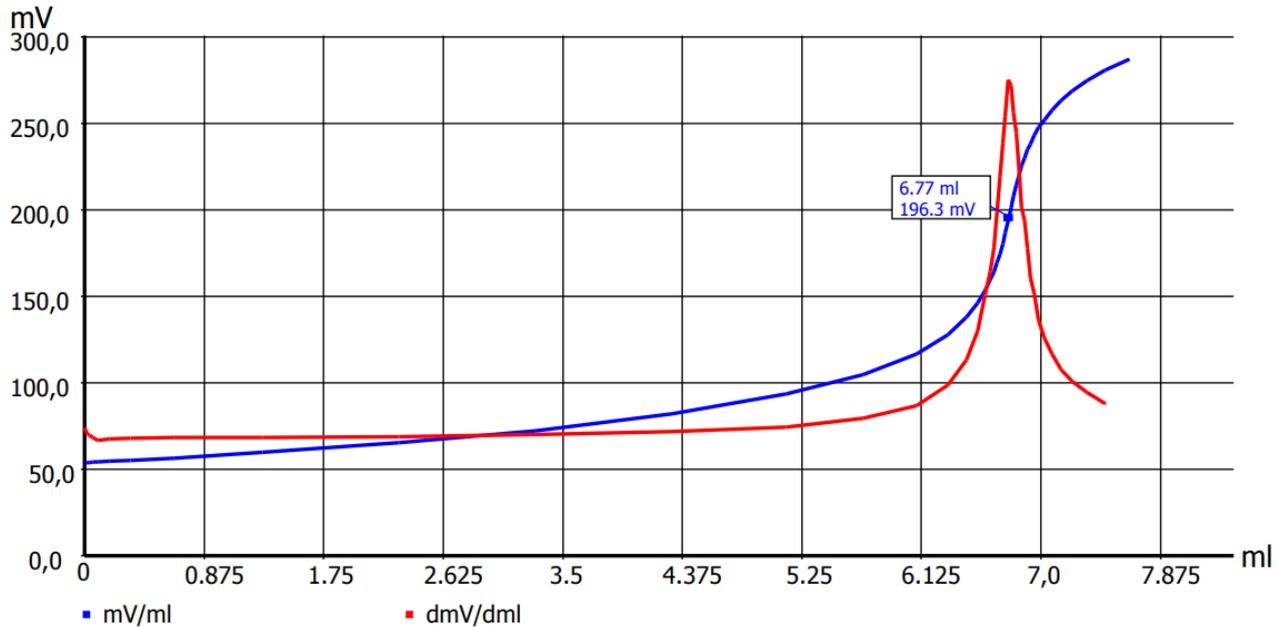

Standardmethode	Chloride in mg/l		
Methodentyp	Automatische Titration		
Modus	Dynamisch		
Messwert	mV		
Messgeschwindigkeit / Drift	Benutzerdefiniert	Min. Wartezeit	3 s
		Max. Wartezeit	15 s
		Messzeit	3 s
		Drift	10 mV/min
Startwartezeit	0 s		
Dynamik	mittel	Max. Schrittweite	1.0 ml
		Steigung bei max. ml	10
		Min. Schrittweite	0.02 ml
		Steigung bei min. ml	120
Dämpfung	keine	Titrationrichtung	steigend
Vortitration	aus	Wartezeit	0 s
Endwert	Aus		
EQ	An(1)	Steigungswert	150
Max. Titrationsvolumen	50 ml		
Dosiergeschwindigkeit	100%	Füllgeschwindigkeit	30 s

Bei der Titration von sehr geringen Chlorid-Gehalten oder bei der Titration in Eisessig sollte die Mindestwartezeit auf 6s und die Drift auf 5 mV/min eingestellt werden. In diesem Fall sollte auch die Dynamik auf Flach eingestellt werden.

Bei manchen Proben kann es vorkommen, dass die Titrationskurve sehr flach ist und der Titrator die Titration nicht am EQ beendet. In diesem Fall kann der Steigungswert für den EQ verringert werden.

Berechnung:

$$Result [mg/l] = \frac{(EQ1 - B) * T * M * F1}{W * F2}$$

B	0	Blindwert
EQ1		Verbrauch des Titrationsmittels am ersten EQ
T	WA	Exakte Konzentration des Titrationsmittels
M	35.45	Molekulargewicht von Chlorid
V	man	Probenmenge [ml]
F1	1000	Umrechnungsfaktor 1
F2	1	Umrechnungsfaktor 2

Soll die Berechnung nicht als mg/l Chlorid, sondern als mg/l NaCl erfolgen, so wird für M die molare Masse von NaCl 58.44 g/mol eingestellt.

Fragen? Bitte kontaktieren Sie unser Applikationsteam:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, SI Analytics
Hattenbergstraße 10
D-55122 Mainz, Germany
Telefon: + 49 6131 66 5126
Fax: + 49 6131 66 5101
E-Mail: titration@si-analytics.com

SI Analytics
a xylem brand

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG · Hattenbergstr. 10 · D-55122 Mainz · Germany
Telefon: +49 6131.66. 5111 · E-Mail: Info.si-analytics@Xyleminc.com · www.si-analytics.com

Alle Namen sind eingetragene Handelsnamen oder Warenzeichen der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen. Technische Änderungen vorbehalten.
© 2018 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.