



# Respirometrischer BSB - sicher, einfach, komfortabel

OXITOP®-i



a xylem brand

# BSB-Messung noch einfacher und sicherer

- Keine Umrechnung mehr nötig – direkte Volumeneingabe am Kopf
- Maximal sichere Messwerte – Anzeige des Kurvenverlaufs am Kopf
- Volle Information – Zwischenwerte jederzeit abrufbar



Oxiotop®-i G



Oxiotop®-i B

## Moderne BSB-Messung

Das neue OxiTop®-i ist ein zeitgemäßes, einfach bedienbares BSB-Messgerät für den biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB). Die Messspannen lassen sich zwischen 1 und 7 Tagen einstellen.

Das Probenvolumen ist im Menü auswählbar. Die Umrechnung in den jeweiligen BSB-Wert erfolgt automatisch, fehlerfrei und komfortabel.

Eine kleine Leuchtdiode zeigt jederzeit den Betriebszustand des Kopfes an.


## Unverwechselbar

Die Köpfe in zwei Farben in modernem Design mit individuell einstellbarer numerischer Probenkennung helfen bei der Unterscheidung zwischen Ein- und Auslauf.


## Display

Ein modernes Graphikdisplay unterstützt die Eingabe und liefert vielfältige Informationen.


- **Anzeige des Kurvenverlaufs**
- **Auswahl des Probenvolumens**
- **Zwischenwerte abrufbar**

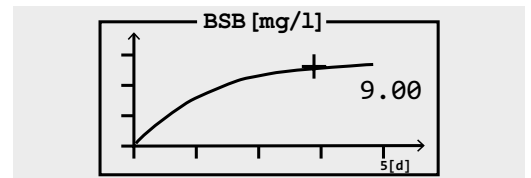

Kopf mit Kurvendarstellung: BSB-Kurve nach 5 Tagen

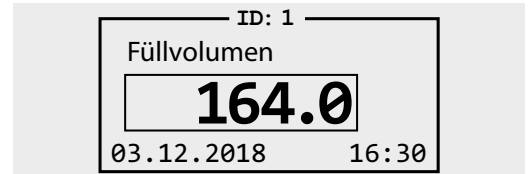

Auswahl Probenvolumen

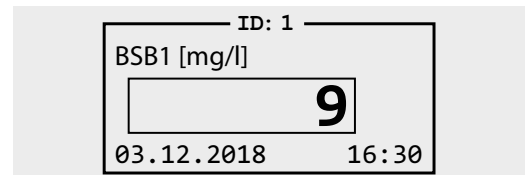

Momentanwert BSB

## Set

Für OxiTop® stehen Sets inklusive Rührplattform und Zubehör zur Verfügung.

- 6 bzw. 12 Messplätze
- Induktive Rührplattformen mit programmgesteuertem Lauf
- Zwei Überlaufmesskolben für Ein- und Auslaufmessung
- Inklusive CO<sub>2</sub>-Absorber und Nitrifikationshemmstoff

## Zubehör

Zur Überprüfung der Druckmessung in Verbindung mit dem OxiTop® PT unterstützt eine in jedem Kopf fest programmierte Routine.

Zur optimalen Inkubation eignen sich unsere neuen Thermostatschränke, fordern Sie unseren Flyer an:

„Temperieren Sie richtig mit Thermo-schränken für OxiTop®“

(Artikelnr.: 999253D)



OxiTop® PT

## Technische Daten

Modell	OxiTop®-i G bzw. OxiTop®-i B
Druckbereich (hPa)	500 bis 1250
Wählbare Messdauer (Tage)	1 bis 7
Wählbare Probenvolumina (ml)	22,7; 43,5; 97,0 ; 164 ; 250 ; 365 ; 432
BSB-Messbereich	0 bis 4000 mg/l
Display	LCD-Graphik, hinterleuchtet, menügesteuert
Kontroll-LED	RGB
Batterie	1 x CR 2450

## Bestellinformation

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
OxiTop®-i IS 6	BSB-Messgerät mit direkter Ausgabe der BSB-Werte am Messkopf zur Eigenkontrollmessung mit 6 Messstellen, Universal-Steckernetzgerät, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, Zubehör.	208260
OxiTop®-i IS 12	BSB-Messgerät mit direkter Ausgabe der BSB-Werte am Messkopf zur Eigenkontrollmessung mit 12 Messstellen, Universal-Steckernetzgerät, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, Zubehör.	208262
OxiTop®-i SET 2	Set für 2 Messstellen, komplett mit 2 OxiTop®-i Messköpfen (1 x blau, 1 x grau), 2 Probeflaschen PF 600, 2 Gummiköcher GK 600 und 2 Magnetrührstäbchen RST 600.	208264
OxiTop®-i SET 6	SET für 6 Messstellen, komplett mit 6 OxiTop® -i Messköpfen (3 x blau, 3 x grau), 6 Probeflaschen PF 600, 6 Gummiköcher GK 600 und 6 Magnetrührstäbchen RST 600.	208266
OxiTop®-i G	OxiTop®-i Messkopf grau, menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208270
OxiTop®-i B	OxiTop®-i Messkopf blau, menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208272
OxiTop®-i 2	2 OxiTop®-i Messköpfe (1 x blau, 1 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208274
OxiTop®-i 6	6 OxiTop®-i Messköpfe (3 x blau, 3 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208276
OxiTop®-i 12	12 OxiTop®-i Messköpfe (6 x blau, 6 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe	208278
<b>Zubehör*</b>		
OxiTop® PT	Testvorrichtung zur Bestimmung der Dichtigkeit und der Funktion des Drucksensors bei Unterdruck für alle OxiTop® Messköpfe	209334

\* Für weiteres Zubehör fordern Sie unsere **kostenlose Preisliste Messtechnik für Labor & Umwelt** an.